



SMART/Teen

powered by BRAUN






מברשת שיניים
חשמלית
לבני נוער
Oral-B


2512957OB00



סוג מטען: 3757
סוג ידית: 3767

Charger Type 3757
Handle Type 3767

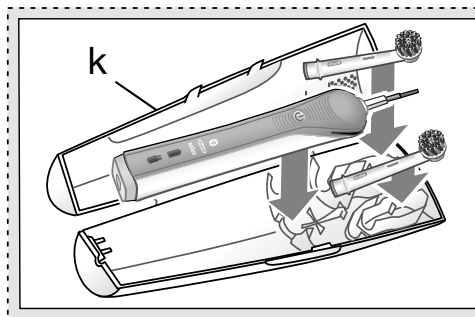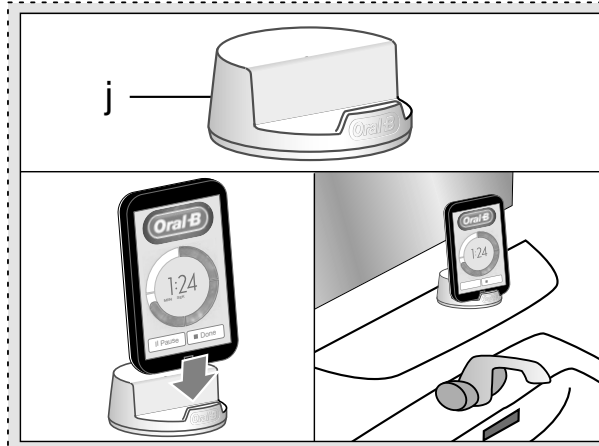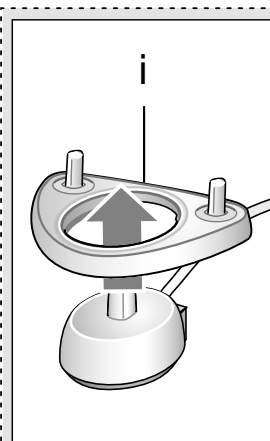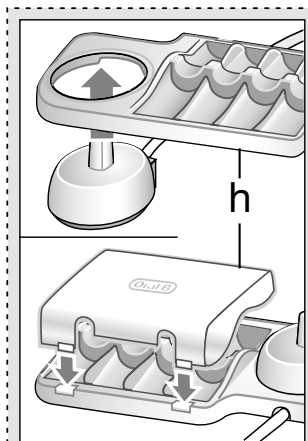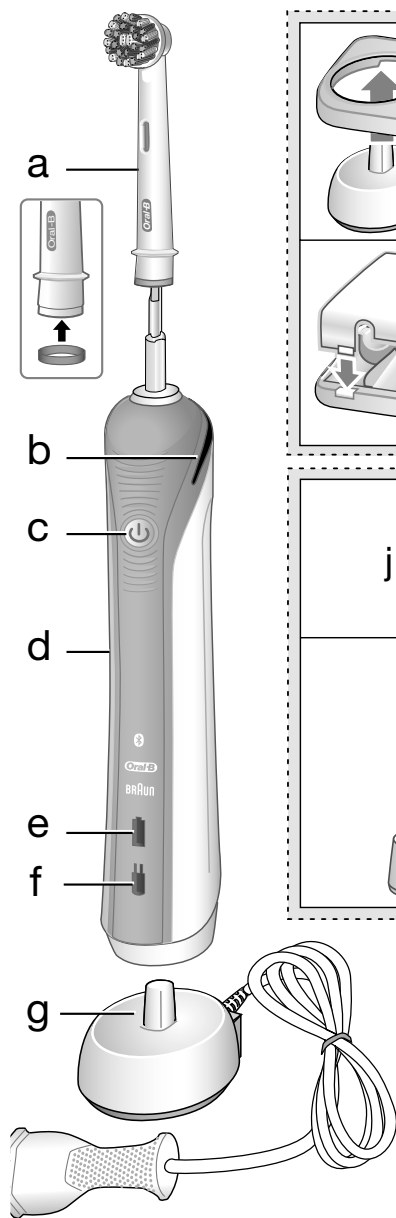

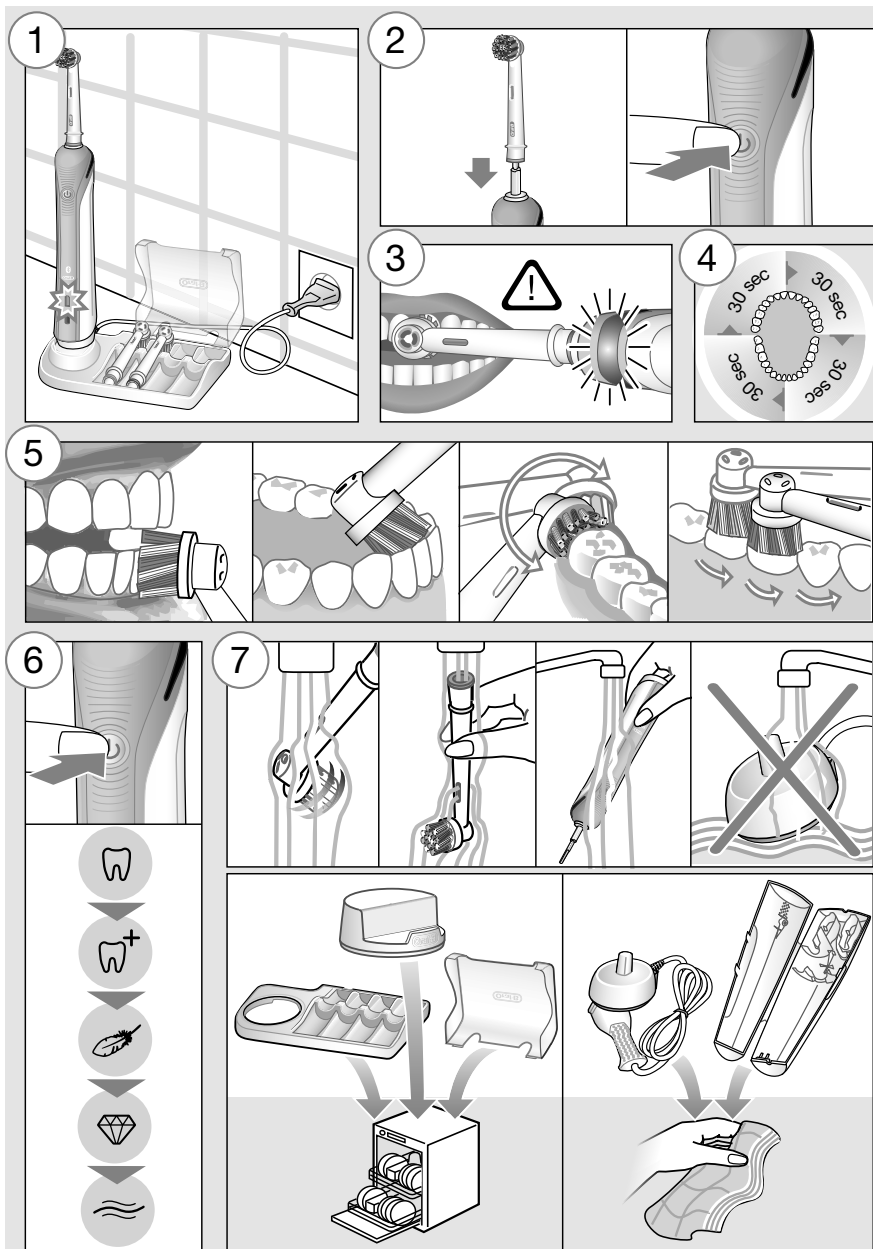

ברוכים הבאים לאורל בי!

לפני השימוש הראשון במברשת השיניים, יש לקרוא את ההוראות בעיון ולשמור את המדריך לעיון בעתיד.

חשוב

- יש לבדוק מעת לעת את כל המוצר\ הכבל ולוודא שלא ניזוקו. אם המוצר\ הכבל ניזוקו, אין להשתמש במוצר, גשו למרכז השירות של אוראל-בי בראון. רשימת מרכזי השירות מופיעה בתעודת אחריות. אין לערוך שינויים במוצר או לנסות לתקנו, מאחר וניסיון כזה עלול לגרום להתלקחות, מכת חשמל או פציעה.
- מוצר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים מתחת לגיל 3. ילדים ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, יכולים להשתמש במברשת שיניים זו, כאשר השימוש נעשה תחת השגחה ולאחר שקיבלו הוראות לגבי השימוש הבטוח במכשיר והבינו את הסיכונים הכרוכים בשימוש בו.
- אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולת תחזוקה.
- אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להשתמש במוצר רק לשימוש המיועד ובהתאם להוראות השימוש כמתואר בעלון זה. אין להשתמש באביזרים שלא הומלצו על-ידי היצרן. יש להשתמש אך ורק במטען המסופק יחד עם המכשיר.

אזהרה

- אין להניח את המטען במים או כל נוזל אחר. אין לאחסן את המטען במקום ממנו הוא עלול ליפול לתוך אמבט או כיור. אם המטען נפל למים, אין לנסות להוציאו. יש לנתקו מיד מהחשמל.
- המוצר מכיל סוללות שאינן ניתנות להחלפה. אין לפתוח או לפרק את המוצר. בתום חיי המכשיר יש להשליך את כולו למחזור בשלמותו לפי הוראת המשרד המקומי לאיכות הסביבה. פתיחת ידית המכשיר תוציא את המכשיר מכלל שימוש והאחריות עליו תתבטל.
- בעת ניתוק המכשיר מן החשמל יש לאחוז בתקע ולא בכבל החשמל. אין לגעת בתקע החשמלי בידיים רטובות מחשש למכת חשמל.
- במידה והנכם עוברים טיפול בחלל הפה יש להתייעץ עם רופא השיניים לפני תחילת השימוש במכשיר.
- המברשת מיועדת לשימוש אישי ואינה מיועדת לשימוש על מטופלים רבים בקליניקות טיפוליות.

- בכדי להימנע משבירת ראש המברשת, העלולה לגרום להתפרקות ראש המברשת לחלקים קטנים ובכך לגרום לסכנת חנק או נזק לשיניים:
- לפני כל שימוש, יש לוודא שראש המברשת מתאים ומורכב היטב. יש להפסיק את השימוש במברשת אם ראש המברשת אינו מתאים. לעולם אין להשתמש במכשיר ללא ראש מברשת.
- במידה וידית המברשת נפלה יש להחליף את ראש המברשת לפני השימוש הבא גם אם למראית עין לא נגרם כל נזק.
- יש להחליף ראש מברשת כל 3 חודשים או קודם אם הוא ניזוק.

- יש לנקות היטב את ראש המברשת לאחר כל שימוש (ראה פסקה "המלצות ניקוי").
- ניקיון ראוי מבטיח שימוש בטוח וישמור על תקינות המברשת.

מידע חשוב

- מברשת השיניים Oral-B שלך ניתנת לשימוש עם הטלפון החכם שלך (פרטים נוספים ב- "חיבור מברשת השיניים לטלפון החכם").
- על מנת למנוע הפרעות אלקטרומגנטיות ו/או בעיות תאימות, יש לנטרל את שידור הרדיו בידית המברשת לפני השימוש במקומות סגורים, כגון מטוסים או אזורים מיוחדים המסומנים בבתי חולים. יש לנטרל את שידור הרדיו כאשר מברשת השיניים כבויה על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי (c) למשך 3 שניות. כל נורות המחוון (b, e & f) יהבהבו בזמנית. יש לבצע את אותן פעולות לצורך הפעלה מחודשת.
- לתשומת לבכם: בכל פעם שמכבים את המברשת, כאשר נעשה שימוש במברשת ללא שידור רדיו, נורות המחוון יהבהבו בזמנית.
- אנשים עם קוצבי לב נדרשים תמיד להרחיק את מברשת השיניים מקוצב הלב במרחק העולה על 15 ס"מ כאשר המברשת פועלת. בכל פעם שקיים חשד להפרעה, יש לנטרל את שידורי הרדיו של מברשת השיניים.

תיאור

- a ראש המברשת
- b נורת חיישן לחץ
- c לחצן הפעלה/כיבוי (בחירת מצבי צחצוח)
- d ידית המברשת (בטכנולוגיית Bluetooth®)
- e נורת מחוון טעינה
- f נורת מחוון טעינה חלשה
- g מטען

אביזרים (תלוי בדגם):

- h תא לאחסון ראש המברשת עם מכסה מגן
 - i מעמד לראש המברשת
 - j מעמד לטלפון החכם (Smartphone)
 - k נרתיק לנסיעות
- הערה:** התוכן עשוי להשתנות כתלות בדגם הנרכש.

מפרט

- מפרט המתח החשמלי מוטבע בתחתית יחידת הטעינה.
- רמת רעש: dB 68 (A)

טעינה והפעלה

מברשת השיניים אטומה למים, בטוחה לשימוש חשמלי ומיועדת לשימוש בחדר האמבט.

- ניתן להשתמש במברשת מיד או להטעין אותה מעט על ידי הנחתה על המטען (g).

הערה: אם הסוללה ריקה (תצוגת מצב הטעינה לא נדלקת (e)) כאשר המברשת בטעינה או שבלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי (c) אין תגובה, יש להטעין למשך 30 דקות לפחות.

- נורית מחוון הטעינה הירוקה (e) תהבהב כאשר הידית בטעינה. כאשר הסוללה טעונה במלואה הנורית תכבה. טעינה מלאה אורכת כ-12 שעות ומאפשרת לפחות שבועיים של שימוש רגיל (פעמיים ביום למשך 2 דקות) (ראה איור 1).
- הערה: במצב טעינה נמוך, נורת המחוון האדומה עלולה שלא להבהב מיד, היא תתחיל להבהב תוך 30 דקות.

- אם הסוללה נחלשת, נורת המחוון האדומה (f) תהבהב במשך מספר שניות בהדלקת \ כיבוי המברשת והמנוע יפחית את מהירותו. כשהסוללה מתרוקנת, המנוע נכבה. ידרשו לפחות 30 דקות טעינה לשימוש אחד.

- ניתן לאחסן את ידית המברשת על יחידת הטעינה המחוברת לשקע חשמלי, על מנת לשמור על טעינה מרבית. אין סיכון לטעינת יתר.

הערה: יש לאחסן את הידית בטמפרטורת החדר לשמירה אופטימלית על קיבולת הסוללה. **זהירות:** אין לחשוף את הידית לטמפרטורות הגבוהות מ-50°C

השימוש במברשת השיניים

שיטת הצחצוח

- יש להרטיב את ראש המברשת במים ולמרוח משחת שיניים על ראש המברשת. ניתן להשתמש בכל סוגי משחות השיניים. כדי למנוע התזה, יש להניח את ראש המברשת על השיניים לפני הפעלת המכשיר (ראה איור 2).
- כאשר מצחצחים את השיניים באחד **מראשי המברשת הרוטטים – מסתובבים**, יש להעביר את מברשת השיניים באיטיות משן לשן ולהתעכב מספר שניות על שטח כל שן (ראה איור 5).

בשימוש בראש מברשת כלשהו, יש לצחצח תחילה את החלק החיצוני של השן, לאחר מכן את החלק הפנימי ולבסוף את אזור השיניים הטוחנות. יש לצחצח את ארבעת חלקי הפה באופן אחיד. מומלץ גם להתייעץ עם רופא השיניים או השינינית לגבי שיטת הצחצוח המתאימה לכם.

בימים הראשונים לשימוש בכל מברשת שיניים חשמלית, ייתכן דימום קל מהחניכיים. ככלל, הדימום אמור להיפסק כעבור מספר ימים. אם הדימום נמשך יותר משבועיים, יש להתייעץ עם רופא השיניים או השינינית.

אם יש לך שיניים ו/או חניכיים רגישות, Oral-B ממליצה להשתמש במצב הצחצוח «Sensitive»

(תלוי בדגם) (אופציונאלי בשילוב עם ראש מברשת «Sensitive» של Oral-B).

מצבי צחצוח (תלוי בדגם)

מצבי צחצוח (לסוג הידית 3767)	מצב - 1	מצבים - 2	מצבים - 3	מצבים - 4	מצבים - 5
- Daily Clean סטנדרטי לניקוי פה יומיומי.	✓	✓	✓	✓	✓
- Pro Clean לתחושת ניקוי יוצאת מן הכלל (פועלת בתדירות גבוהה).					✓
- Sensitive ניקוי עדין, אך עם זאת יסודי למקומות רגישים.		✓	✓	✓	✓
- Whitening ליטוש יוצא מן הכלל לשימוש מידי פעם או לשימוש יומיומי.			✓	✓	✓
- Gum Care עיסוי עדין לחניכיים.				✓	✓

מברשת השיניים שלכם תכנס תחילה אוטומטית למצב צחצוח «Daily Clean». בכדי להחליף למצב צחצוח אחר, יש ללחוץ לחיצה מתמשכת על לחצן ההפעלה/ כיבוי (ראה איור 6). יש לכבות את המברשת ע"י החזקת לחצן ההפעלה/כיבוי עד שהמנוע יפסיק לפעול.

הערה: ניתן לכוון\להרחיב את פונקציונליות מצבי הצחצוח באמצעות האפליקציה של אורל בי Oral-B™ App.

טיימר מקצועי

צליל קצר מקוטע במרווחים של 30 שניות יזכיר לכם לצחצח באופן שווה בכל אחד מרבעי הפה (ראה איור 4). צליל ארוך מקוטע יאותת על כך שחלפו 2 דקות (זמן הצחצוח המומלץ).

במידה ומכבים את המברשת במהלך הצחצוח, זמן הצחצוח שעבר ישמר במכשיר במשך 30 שניות. במידה ועוצרים את הצחצוח יותר מ-30 שניות הטיימר מתאפס.

הערה: ניתן לכוון\להרחיב את פונקציונליות הטיימר באמצעות האפליקציה של אורל בי Oral-B™ App.

חיישן לחץ

אם לחץ רב מדי מופעל על השיניים בזמן הצחצוח, תדלק הנורית האדומה של חיישן הלחץ (b), בכדי להתריע שצריך להפחית את הלחץ.

בנוסף, הפולסים של ראש המברשת יפסקו והתנועה תאט (נכון למצבי הצחצוח: «Pro Clean», «Daily Clean» ו-«Sensitive» (ראה איור 3).

סוגי ראשי מברשת

Oral-B מציעה לך מגוון רחב של ראשי מברשות המתאימים לידית מברשת השיניים שלך.



ראש המברשת Oral-B Sensi Ultrathin

מורכב מסיבים רגילים לניקוי פני השטח של השיניים וסיבים דקים במיוחד לניקוי עדין של החניכיים.

מרבית ראשי המברשת של Oral-B מצוידים בסיבי אינדיקטור כחולים (INDICATOR®) המהווים סימן להחלפת ראש המברשת. בצחצוח יסודי פעמיים ביום למשך שתי דקות, הצבע הכחול ידהה עד מחצית אורך הסיבים תוך בערך 3 חודשים ויסמן שהגיע הזמן להחליף את ראש המברשת. אם הסיבים מתחילים להתפצל לפני שהצבע מתחיל לדהות, זהו סימן לכך שמופעל לחץ רב מידי על השיניים והחניכיים.

למרכיבי גשר ליישור שיניים לא מומלץ להשתמש בראשי המברשת Oral-B FlossAction או Oral-B 3DWhite. ניתן להשתמש בראש המברשת Oral-B Ortho המיועד לניקוי סביב גשר ליישור השיניים והתיל האורתודנטי.

חיבור מברשת השיניים לטלפון החכם

אפליקצית Oral-B™ זמינה למכשירים ניידים הפועלים על מערכת הפעלה iOS או אנדרואיד. האפליקציה ניתנת להורדה בחינם מ-Google Play™ או App Store™.

אפליקצית Oral-B™ נותנת לך הזדמנות למפות את ההתקדמות הצחצוח שלך ולהתאים את הגדרות מברשת השיניים שלך (ליתרונות נוספים עיין בהוראות של אפליקצית Oral-B™).

• הפעל את אפליקצית Oral-B™. אפליקצית Oral-B™ תנחה אותך בתהליך התאמת ה-Bluetooth.

הערה: פונקציונליות אפליקצית Oral-B™ מוגבלת אם ה-Bluetooth כבוי במכשיר הטלפון שלך (להנחיות יש לעיין בעלון ההוראות של הטלפון החכם שלך).

• כאשר האפליקציה מבקשת, יש להפעיל את ה-Bluetooth באמצעות הרמת המברשת מהמטען (g) או הדלקה וכיבוי מהירים של המברשת (c). המברשת תתחבר אוטומטית לאפליקצית Oral-B™.

• כל הוראות האפליקציה יוצגו על הטלפון החכם שלך.

• שמור את הטלפון בקרבת מקום (במרחק של 5 מטרים) בעת השימוש בו עם מברשת השיניים שלך. ודא כי הטלפון מונח בביטחון במקום יבש.

• בזמן השימוש, ניתן להניח את הטלפון החכם על המעמד לטלפון החכם (j) (תלוי בדגם). לפני השימוש, יש לוודא שהטלפון מתאים למעמד והוא נשאר יציב. הערה: הטלפון החכם שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth 4.0 (או יותר) \ Bluetooth Smart כדי להתחבר למברשת השיניים.

זהירות: יש לבדוק בעלון השימוש של הטלפון החכם אם הטלפון \ המטען מתאים לשימוש באמבטיה.

המלצות ניקוי

לאחר צחצוח השיניים, יש לשטוף את ראש המברשת מתחת למים זורמים במשך מספר שניות כאשר הידית מופעלת. לאחר מכן יש לכבות את ידית המברשת ולנתק ממנה את ראש המברשת. יש לשטוף במים את ידית המברשת וראש המברשת בנפרד. יש לנגבם עד שתייבשו. יש לנתק את יחידת הטעינה לפני הניקוי. החלקים הבאים ניתנים לניקוי במדיח כלים: תא לאחסון ראש המברשת (h), מעמד לראש המברשת (i), מעמד לטלפון החכם (j) (Smartphone). את המטען (g) והנרתיק לנסיעות (k) יש לנקות עם מטלית לחה בלבד (ראה איור 7).

העלון נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

הגנת הסביבה

מוצר זה מכיל סוללות ו\או חלקים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על איכות הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכם לאשפה הביתית. יש להשליכם בנקודות המחזור או איסוף הפסולת האלקטרונית המקומית המתאימה ברחבי המדינה.



אחריות

אנו מעניקים אחריות לתקופה של שנתיים. האחריות נכנסת לתוקף ביום רכישת המוצר. בתקופת האחריות נטפל, ללא עלות ללקוח, בכל פגם במכשיר שנגרם כתוצאה מבעיה בחומרי הגלם או בתהליך הרכבתו, אם בתיקון, אם בהחלפת המכשיר בשלמותו כראות עינינו. אחריות זו תקפה בכל מדינה בה בראון או מפצים מטעמה מספקים את המכשיר.

אחריות זו אינה מכסה: נזק כתוצאה משימוש לא ראוי, בלאי או שימוש סביר, במיוחד של ראשי המברשות, וכן פגמים זניחים שאינם מורידים מערכו של המכשיר או פוגעים ביכולת הפעולה שלו. תוקפה של האחריות יפקע במקרה של תיקונים שיבוצעו בידי אנשים שאינם מורשים ואם לא נעשה שימוש בחלקים מקוריים של בראון.

מכשיר זה מצויד ב-Bluetooth חכם עם יחידת רדיו. כשל בחיבור Bluetooth עם טלפון מסויים אינו מכוסה במסגרת אחריות המכשיר, אלא אם חיבור ה-Bluetooth של המכשיר נפגע. מכשירי ה-Bluetooth בעלי אחריות על ידי היצרנים שלהם ולא על ידי Oral-B. Oral-B לא משפיעה על החלטת יצרני המכשיר, לכן Oral-B לא נוטלת שום אחריות למספר המכשירים המתאימים למערכות ה-Bluetooth.

Oral-B שומרת לעצמה את הזכות, ללא כל הודעה מוקדמת, לבצע שינויים טכניים ביישום מערכת של

תכונות מכשיר, ממשק, ושינויים במבנה תפריט שנראים נחוצים כדי להבטיח את אמינותן של מערכות Oral-B.

לצורך קבלת שירות במהלך תקופת האחריות כמפורט בתעודת אחריות, יש להביא/לשלוח את המכשיר על כל חלקיו לרבות יחידת הטעינה, עם מדבקת האחריות ותעודת האחריות, חתומות כנדרש בצירוף חשבונית הקנייה למרכז השירות של Oral-B Braun.

מודל הרדיו של Bluetooth®

למרות שכל הפונקציות של מכשיר ה-Bluetooth נתמכות, Oral-B לא מבטיחה 100% אמינות בחיבור ועקביות פעולת המכשיר. הביצועים ואמינות החיבור תלויים ישירות בהתקן, גרסה, מערכות ההפעלה של מכשירי ה-Bluetooth השונים ותקנות הבטיחות המיושמות במכשיר. Oral-B שומרת ומיישמת את התקני Bluetooth על ידי כך שמכשירי ה-Bluetooth יכולים להתחבר ולעבוד עם מברשות השיניים של Oral-B. אף על פי כן, במידה ויצרני המכשירים לא מיישמים כהלכה תקן זה, התאימות ותכונות של Bluetooth יפגעו והמשתמש עלול לחוות בעיות בפונקציונליות של המכשיר. נא שים לב כי התוכנה שעל מכשיר ה-Bluetooth משפיעה מאוד על התאימות והפעולות.

1) אחריות – חריגים ומגבלות

האחריות המוגבלת תקפה רק למוצרים אשר מיוצרים דרך/עבור פרוקטר אנד גמבל, או חברות הבת שלה ("P&G") אשר ניתן לזהות על ידי הסימון של בראון/אוראל-בי, שם מסחרי, או לוגו המודבק אליו. אחריות זו אינה תקפה על מוצרים שאינם P&G כולל חומרה ותוכנה. P&G אינה אחראית לכל נזק או אובדן של כל תוכנות, נתונים, או מידע או כל מדיה נמצאת בתוך המוצר, או מוצר/חלק שאינו P&G או שאינו מכוסה על ידי אחריות מוגבלת זו.

שחזור או התקנה מחדש של תוכנות, נתונים או מידע אחר אינו מכוסה במסגרת אחריות מוגבלת זו.

אחריות מוגבלת זו אינה חלה על (i) נזק שנגרם על ידי תאונה, התעללות, שימוש לרעה, הזנחה, יישום שגוי, או מוצר שאינו (ii) P&G הנזק שנגרם על ידי שירות שבוצע לא על ידי מורשה מטעם בראון או מרכז השירות של בראון; (iii) מוצר או חלק ששונה ללא אישור בכתב של P&G.

וכן, (iv) נזק הנובע מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש במעמד הטלפון של אוראל-בי, מחזיק הטלפון למראה, או נרתיק הטעינה לנסיעות („אביזרים נלווים“).

2) שימוש במעמד הטלפון

אביזרים של אוראל-בי הכלולים בחבילה עוצבו כדי לספק לך דרך נוחה למקם את הטלפון החכם שלך

בזמן שאתה משתמש באפליקציית Oral-B. נסה את האוריינטציות השונות האפשריות להנחת הטלפון במעמד הטלפון של אוראל-בי לפני השימוש כדי לקבוע את המיקום הטוב ביותר. הקפד לנסות זאת באופן שלא יפגע בטלפון החכם שלך אם הוא נופל. אין להשתמש בכלי רכב.

הגבלת אחריות

במידה המותרת על פי דין החל, בשום מקרה P&G, מפיצה או ספקיה אינם אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי עבור כל נזק ישיר, לא ישיר, עקיף, מיוחד, פיצוי או עונש, מכל סוג שהוא הנגרם כתוצאה מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש באביזרים של אוראל-בי, כולל, ללא הגבלה, פגיעה באנשים, נזק

לרכוש, אובדן הערך של כל מוצרי צד שלישיים אשר נעשה בהם שימוש עם אביזרי אוראל-בי, או אובדן שימוש באביזרי אוראל-בי או מוצרי צד שלישיים אשר נעשה בהם שימוש עם אביזרי אוראל-בי, גם אם נודע ל-P&G על אפשרות של נזקים אלה. מבלי להגביל את האמור לעיל, אתה מבין ומסכים ש-P&G לא נוטלת אחריות לכל נזק או הרס למכשירים אלקטרוניקה או רכוש אישי אשר מוכל או יכול את אביזרי אוראל-בי, או כל אובדן של הנתונים הכלול בהתקנים המוזכרים לעיל. בכל מקרה של תביעה נגד אוראל-בי הסכום לא יעלה על המחיר ששולם בפועל לרכישת מוצרים.

בעיה	סיבה האפשרית	פתרון
אפליקציה		
מברשת השיניים לא פועלת (כראוי) עם אפליקצית Oral-B.	1. אפליקצית Oral-B כבויה. 2. Bluetooth לא דלוק בטלפון החכם שלך. 3. שידורי הרדיו במברשת השיניים מכובה; תצוגת שידור הרדיו מכובה. 4. החיבור ל-Bluetooth נותק. 5. הטלפון החכם שלך לא תומך ב-Bluetooth 4.0 (או יותר) \ Bluetooth Smart. 6. מברשת השיניים מחוברת למטען.	1. הדלק את אפליקצית Oral-B. 2. הדלק את ה-Bluetooth בטלפון החכם שלך (כפי שמתואר בעלון הצרכן לטלפון). 3. הדלק את שידור הרדיו על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה \ כיבוי (C) למשך 3 שניות. 4. הדלק וכבה במהירות את המברשת (C) כדי לבצע חיבור מחדש בין מברשת השיניים והטלפון דרך ההגדרות באפליקציה. - שמור את הטלפון בקרבת מקום בעת השימוש בו עם מברשת השיניים שלך. 5. מכשיר הטלפון שלך חייב לתמוך ב-Bluetooth 4.0 (או יותר) \ Bluetooth Smart כדי להתחבר למברשת השיניים שלך. 6. במהלך טעינת מברשת השיניים שידור הרדיו יהיה מכובה.
איפוס להגדרות יצרן	רצון לחזור לפונקציונאליות המקורית.	לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה \ כיבוי (C) למשך 10 שניות עד שכל האורות (b, e, f) יהבהבו פעמיים בו זמנית. הערה: שידורי הרדיו יכולים להכבות או להדלק במהלך האיפוס. לאחר האיפוס שידורי הרדיו ידלקו מחדש.

בעיה	סיבה האפשרית	פתרון
מברשת השיניים		
מברשת השיניים אינה פועלת (בשימוש ראשון).	הסוללה עם רמת טעינה נמוכה מאוד; אין אורות דולקים.	יש להטעין את הידית למשך 30 דקות.
המברשת אינה מפעילה שום טיימר.	הטיימר שונה/נוטרל על ידי האפליקציה.	היעזר באפליקציה לשינוי הגדרות הטיימר או לאיפוס (ראה "פתרון בעיות אפשריות – אפליקציה")
המברשת אינה נטענת ומהבהבת.	טמפרטורת הסביבה לטעינה היא מחוץ לטווח חוקי ($0^{\circ}\text{C} \leq -1$ ו- $60^{\circ}\text{C} \geq$).	טמפרטורת הסביבה המומלצת לטעינה הינה 5°C עד 35°C .

מברשת השיניים הנטענת המצורפת מכילה משדר רדיו הפועל בטווח בין 2.4 GHz עד 2.48 GHz עם כוח מקסימלי של 1 מילי-ואט. בזאת, חברת בראון מצהירה כי סוג ציוד רדיו, 3762, 3767, 3754, 3764, 3765 עומד באמות EU/2014/53. הנוסח המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: www.oralb.com/ce.

יצרן: בראון, גרמניה.
 יבואן: מ.מ.ס מולטימרקטינג סרביס בע"מ
 רח' החרמון, קריית שדה התעופה, 7015100
 ח"פ: 510562036.
 משווק: דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ.
 מוצר זה מיובא מחו"ל יש להתייחס לכיתוב בעברית בלבד.
 שרות צרכנים: 1-800-666-775