





מדריך הפעלה מהירה
מכשיר להסרת שיער בשיטת IPL

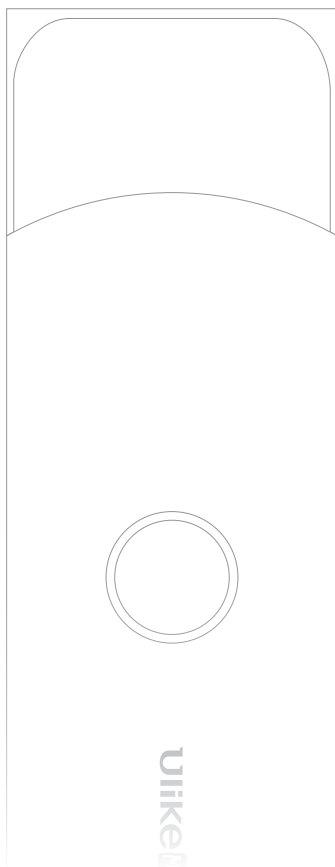


הכרת המכשיר

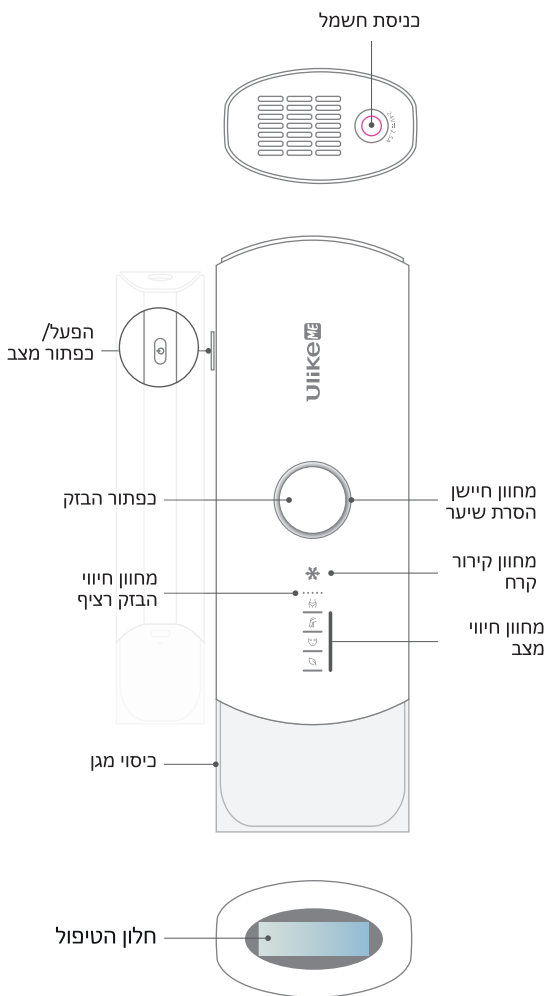

שלבים


שלב 1

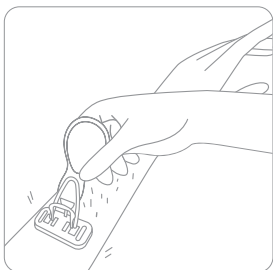

יש להשתמש במכשיר לאחר גילוח העור. אל תאפשרו לסכין הגילוח לגעת ישירות בעור ללא שימוש בקצף גילוח או סבון רחצה.

יש להשתמש בסכין הגילוח בהירות ובאופן מבוקר כדי למנוע חתכים ופציעות.


שלב 2

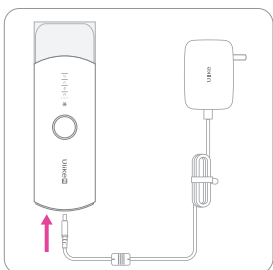

חבר את כבל החשמל לממשק כניסת החשמל במוצר ולאחר מכן חבר את הכבל לשקע החשמל.

לאחר סיום הסרת השיער, כבה את המכשיר לפני ניתוק כבל החשמל, כדי למנוע נזק למערכת החשמלית.


שלב 3

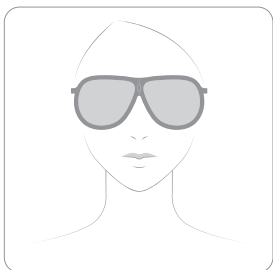

הרכיבו משקפי מגן לפני תחילת הסרת השיער, על מנת להגן על העיניים מפני קרני האור.

אין להסתכל ישירות על הבזקי האור במהלך הסרת השיער.

שלב 4

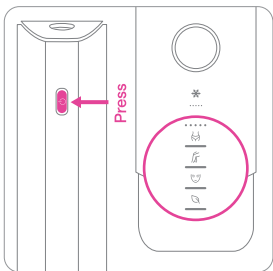

לחץ על לחצן ההפעלה בצד המכשיר כדי להפעילו, ולאחר מכן בחר את מצב העבודה המתאים.

- בחר את המצב המתאים לפי חלק הגוף שעליו תבצע את ההסרה.


- המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 3 דקות של חוסר פעילות.

שלב 5

הנח את חלון הטיפול על העור, ולאחר מכן לחץ על כפתור ההבזק כדי להפעיל הבזק יחיד ולהתחיל בהסרת השיער.

המלצה:


כדי להשיג תוצאות מיטביות, מומלץ לעבור על כל אזור פעמיים – רצוי מזוויות שונות – על מנת להבטיח כיסוי מלא של שטח העור המטופל.

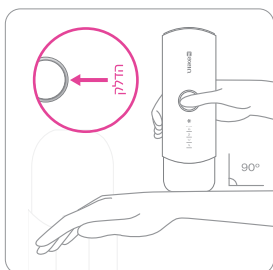

שלב 6

לאחר השלמת הסרת השיער: לחץ והחזק את לחצן ההפעלה כדי לכבות את המכשיר.

▪ כבה את המכשיר לפני ניתוק כבל החשמל – פעולה זו מסייעת במניעת נזק אפשרי למערכת החשמל של המכשיר.

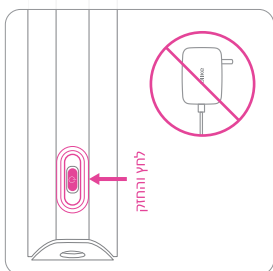

מבוא מצבים

● מצבים



מצב תחזוקה

מתאים לשפם /
אזורים רגישים /
אנשים עם עור
כהה יותר / אנשים
עם עור רגיש וכו'.

מצב פנים

מתאים לאזור הפנים


מצב גוף

מתאים לשימוש על
גפיים וגו לאנשים
עם צפיפות שיער
בינונית עד נמוכה
או גסות שיער

מצב ביקיני/ בית השחי

מתאים לאנשים
עם שיער עבה וגס
באזורי ביקיני ובתי
השחי


● מצב הבזק מתמשך (מתאים לאזורים גדולים כגון ידיים ורגליים)

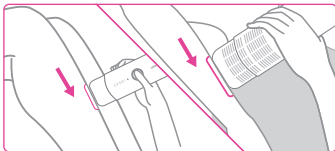

- הנח את חלון הטיפול על העור. כאשר נורית החיווי להסרת שיער נדלקת – סימן שהמכשיר נמצא במגע מלא עם העור ומוכן לפעולה.
- לחץ והחזק את כפתור ההבזק. כאשר נורית מצב ההבזק הרציף נדלקת – המכשיר פועל במצב הבזקים אוטומטיים.
- לאחר כל הבזק, העבר את חלון הטיפול לאזור הבא. השתמש בתנועה רציפה ובהטבעה עדינה כדי להבטיח טיפול אחיד ולמנוע פספוס של אזורים.
- החלק את חלון הטיפול פעמיים על כל אזור, בזווית שונה – לשם כיסוי מלא ותוצאה אחידה.

● מצב פלאש יחיד

(מתאים לאזורים קטנים כגון אצבעות ושפה עליונה)

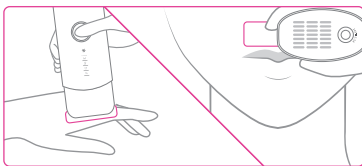

- הנח את חלון הטיפול על העור. כאשר נורית החיווי להסרת שיער נדלקת – סימן שהמכשיר נמצא במגע מלא עם העור ומוכן לפעולה.
- לחץ והחזק את כפתור ההבזק. כאשר נורית מצב ההבזק הרציף נדלקת – המכשיר פועל במצב הבזקים אוטומטיים (ללא צורך בלחיצה חוזרת).
- העבר את חלון הטיפול לאזור הבא לאחר כל הבזק. השתמש בתנועת הטבעה מתמשכת כדי להבטיח טיפול אחיד, ללא פספוסים או דילוגים על אזורים.
- החלק על כל אזור טיפול פעמיים – מזווית שונה – כדי להבטיח כיסוי מלא ותוצאות מיטביות.
- אם העור שלך מגיש מחומם יתר על המידה במהלך תהליך הסרת השיער, השהה למשך כ-10 שניות כדי לאפשר לשקע האור להתקרר לפני שתמשיך.


טיפים לשימוש במכשיר

שאלה 1: מדוע עלי לגלח את השיער לפני השימוש במכשיר?

ת: המכשיר פועל על ידי מיקוד האנרגיה במלינין שבזקיק השערה – לא בשיער שעל פני העור. גילוח שיער פני השטח מסיר את המחסום ומאפשר לפעילות האור להתמקד ישירות בזקיק. כך מובטחת ספיגה יעילה של האנרגיה בזקיק השערה, במקום שהיא תתבזבז על השיער החיצוני.

ש 2: כיצד אוכל להשיג את אפקט קירור ספיר הטוב ביותר במהלך הסרת שיער?

ת: המכשיר צובר אנרגיה במהלך שימוש במצב הבזקים מתמשכים. לאחר השלמת הטיפול באזור מסוים, החלק בעדינות את חלון הטיפול על פני האזור המטופל במשך כ-30 שניות לפני שתעבור לאזור הבא.

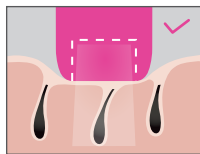

ש 3: מדוע חשוב שחלון הטיפול יהיה במגע מלא עם העור במהלך הסרת השיער?

ת: יש להצמיד את חלון הטיפול היטב לעור במהלך השימוש, על מנת להבטיח שהאנרגיה תיספג בצורה יעילה על ידי זקיקי השיער ולהשיג תוצאות מיטביות בהסרת השיער. מגע קרוב זה מאפשר גם למערכת הקירור שבחלון הטיפול לקרר את העור מראש, להפחית את תחושת החום ולספק הגנה טובה יותר לעור במהלך הטיפול.



ש 4: האם אני יכול למרוח מוצרי טיפוח לפני הסרת שיער?

ת: יש לוודא כי אזור הטיפול נקי ויבש לפני תחילת השימוש במכשיר. במידה ואתה משתמש במוצרי לחות, המתן עד שייספגו לחלוטין בעור – ורק לאחר מכן התחל בטיפול.

ש 5: מה לוח הזמנים והתדירות המומלצים?

ת: שבועות 1-2: שלוש פעמים בשבוע; שבועות 3-5: פעמיים בשבוע; אחר ש 5: פעם בשבועיים או פעם בחודש.

ש 6: מדוע המכשיר לפעמים לא מהבהב?

ת: מטעמי בטיחות, המכשיר לא יפעיל הבזק אלא אם חלון הטיפול במגע מלא עם העור. במהלך הטיפול, ודא שהמכשיר ממוקם בניצב לעור. כאשר נורית החיווי הופכת ללבן, סימן שהמכשיר מוכן – וההבזק יתבצע בלחיצה.

הוראות NFC נגד זיוף

● שלבים

שלב 1

ודא שפונקציית ה-NFC מופעלת בטלפון שלך:
מכשירי Android:

עבור אל הגדרות > אפשרויות חיבור נוספות > הפעל את NFC.

מכשירי iOS:

עבור אל הגדרות > כללי > הפעל את NFC.

שלב 2

קרב את אזור חישת ה-NFC של הטלפון שלך לאזור זיהוי ה-NFC של המכשיר. כאשר הטלפון מזהה את מכשירי ה-NFC, הוא ירטוט ויקפיץ אוטומטית קישור לדפדפן. לחץ על הקישור כדי לגשת לדף הייעודי למניעת זיוף של המוצר, שיציג אימות רשמי לאותנטיים. התמונה השמאלית מציגה את אזור זיהוי ה-NFC במכשיר; התמונה הימנית מציגה את דף האימות נגד זיוף.



שלב 3

אם המוצר אינו אותנטי, לא יופיע קישור לדפדפן.

● בעיות אפשריות במהלך השימוש

1. התקן NFC לא זוהה. זה עשוי להתרחש אם פונקציית ה-NFC בטלפון שלך אינה מופעלת. בצע את השלב הראשון בהוראות.
2. לא מוצג מידע בדף המוצר. ייתכן שזה נובע מבעיית רשת. אנא בדוק את חיבור הרשת בטלפון שלך ונסה שוב.
3. "הרשומה לא נמצאה" מוצג בדף המוצר. זה עלול לקרות אם מזיזים את הטלפון מהר מדי לאחר החישה, ובתוצאה מכך שידור נתונים לא שלם. ודא שהטלפון נשאר בקשר לפחות שנייה אחת.
4. לא מופיע קישור לדפדפן למרות זמן יצירת קשר מספיק. אם הבעיה נמשכת לאחר ניסיונות מרובים, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות הרשמי לקבלת סיוע נוסף.

תעודת אחריות

מספר חשבונית	שם החנות:	תאריך רכישה:
מספר סידורי:	דגם:	שם היצרן:
E-MAIL:	טלפון:	שם הלקוח:
כתובת:		

האחריות למוצר היא לתקופה של 24 חודשים מיום הרכישה בכפוף לחוק הגנת הצרכן | אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית רכישה | האחריות למתן שירות באמצעות החברה בלבד ו/או מעבדות שירות מטעמה | הובלת המוצר למעבדה היא באחריות הלקוח בלבד, במידה ויבקש להשתמש בשירותי ההובלה של החברה, הוצאות ההובלה יחולו על הלקוח | האחריות כוללת תיקון ללא תמורה של קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר כולו או חלק ממנו | אין אחריות חלה במקרה של שבר או נזק.

האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
התקלה במוצר היא עקב שימוש לא מתאים, או שימוש שלא למטרה, או בניגוד להוראות, או תקלות שמקורן במתח חשמל, או כל חיבור חשמלי שלא סופק על ידי החברה | המוצר תוקן או טופל על ידי גורם אשר אינו מאושר מטעם החברה | בכל מקרה, בין אם בדדון ובין אם הקלקול נובע מרשלנות, כוח עליון, שפיכת נוזלים, קורוזיה, שבר, חשיפה לשמש ו/או לטמפרטורות קיצוניות, התפוצצות | האחריות לא חלה על אביזרים נלווים כגון: כיסויים, סוללות, אוזניות, מגני מסך, כבלים, נרתיקים, רמקולים ניידים וכד.

אם במהלך תיקון יתגלה כי הקלקול נגרם באחת מן הנסיבות המוזכרות לעיל ו/או בקשר עם ליקוי או אי התאמה בתוכנה, הרוכש ישלם עבור שעות העבודה שידרשו ואביזרים שיעשה בהם שימוש או תיקון בהתאם למחירון החברה שיהיו בתוקף במועד המדובר. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית למידע אשר נמצא על המכשיר לרבות רשימת אנשי קשר, תמונות, קבצי מדיה ואפליקציות שנרכשו באחריות הלקוח לגבות מידע זה טרם הבאת המכשיר לתיקון.



לקבלת האחריות על המוצר יש לסרוק את ה-QR ולמלא את פרטיך.



Online@ulike.co.il | 03-5656246 .לט