



הוראות הפעלה
למשקל אדם אלקטרוני
דגם XF888

זכוכית המשקל עלולה להתנפץ במקרה של נפילה, חבטה חזקה, מכה בצידי הזכוכית או פגיעה בחפץ אחר. יש למקם את המשקל הרחק מקירות או רהיטים.



הוראות הפעלה למשקל אדם אלקטרוני דגם: XF888

נתונים טכניים


יכולת שקילה: עד 180 ק"ג.

יחידות מדידה: ניתן לבצע מדידה ביחידות של ק"ג או ביחידות של ליברה.

ערך שנת: 100 גרם.


תצוגה: ארבע ספרות דיגיטליות.

הפעלה / כיבוי: המשקל מופעל אוטומטית בעת העמידה עליו ונכבה אוטומטית לאחר כ-10 שניות ללא שימוש.

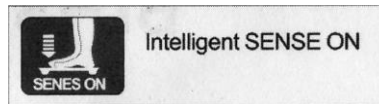

הוראות הפעלה:

- יש להתקין את הסוללות המצורפות בהתאם לסימונים על תא הסוללות (ראה/י איור 1). לאחר התקנת הסוללות, הצג נדלק וניתן להשתמש במשקל.
- יש לבחור ביחידת המשקל הרצויה (ק"ג או ליברה) בעזרת הלחצן הנמצא מעל תא הסוללות.
- יש להניח את המשקל על משטח קשה ושטוח. לצורך דיוק הבדיקה, אין להניח את המשקל על שטיח או משטחים רכים אחרים.
- יש לעלות על המשקל בזהירות ולעמוד במרכזו ללא תנועה כאשר הרגליים מקבילות אחת לשניה. תוצאת המשקל תופיע על גבי הצג (ראה/י איור 2).
- לשקילה חוזרת, יש לרדת מהמשקל ולהמתין להופעת '0.0' על הצג. לאחר מכן, ניתן להישקל שוב.
- לאחר כ-10 שניות ללא שימוש המשקל ייכבה אוטומטית.

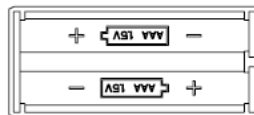

איור 1:



איור 2:

מקרא התרעות:

1. יש צורך להחליף סוללות כאשר מופיע סימן LO על גבי הצג.



2. במידה וקיים עומס יתר (יותר מ-180 ק"ג/396 ליברות), מופיע סימן ERR על הצג.



הוראות בטיחות:

- יש להקפיד על משטח יבש למניעת החלקה.
- כאשר המשקל אינו בשימוש, יש לאחסנו במצב מאוזן ואין להניח עליו דברים על מנת שלא לפגוע בדיוק המשקל.
- יש לנקות את המשקל באמצעות בד לח. אין להרטיב את המשקל במים. אין לנקות עם חומרי ניקוי כימיים.
- יש להסיר את הסוללות במידה והמשקל לא בשימוש זמן רב.
- שינוי מיקום המשקל עלול להשפיע על תוצאת השקילה.
- ייתכן כי תוצאת השקילה הראשונה לאחר התקנה או החלפת סוללות לא תהיה מדויקת.

אחריות ושרות

אין לפתוח / לפרק את המשקל על מנת שלא לפגוע באחריות.
האחריות הינה למשך שנה בלבד ואינה מכסה שבר או נזק הנגרם משימוש לא נכון.
האחריות הינה כנגד הצגת חשבונית קניה.
פניות בכתב למאג'י יבוא ושיווק ת.ד. 407, נס ציונה 74104.

מוצרי Life, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית. לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151

מיוצר עבור ומשווק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516.

יצרן: קסינפו האוסהולד אלקטרוניק בע"מ, 8 גיונגשאן, גואנגדונג, סין.

יבואן: מאג'י יבוא ושיווק בע"מ, ת.ד. 407, נס ציונה 74104.

דגם: XF888.

מספר אישור דגם: WM0970-17BS

