



משקל אדם אלקטרוני

עם השוואת נתוני שקילה נוכחית וקודמת.



דגם XF-B2250

אנא קרא/י הוראות אלו לפני הפעלה.  
נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד.

# משקל אדם אלקטרוני עם השוואת נתוני שקילה נוכחית וקודמת.

## דגם XF-B2250

### הוראות הפעלה, בטיחות ואחזקה.

המשקל הינו משקל אלקטרוני דיגיטלי המאופיין ברמת דיוק גבוהה ובעל חיישנים אלקטרוניים המבטיחים עמידות לאורך שנים.

#### נתונים טכניים:

- טווח מדידה: 2.5 ק"ג עד 180 ק"ג.
- יחידות מדידה: ניתן לבצע מדידה ביח' של ק"ג או ביח' של ליברה.
- ערך שנת: 100 גרם.
- תצוגה: מסך LCD בגודל 59X60 מ"מ עם תאורת לד כחולה.
- טמפרטורות עבודה: 35c – 10c
- 10 זיכרונות למשתמשים שונים P0-P9.
- הצגת משקל נוכחי בנוסף לתוצאת השקילה האחרונה ואת ההפרש בין השקילות.
- הדלקה ואיפוס אוטומטים בעת עליה על משטח השקילה.
- כבה אוטומטית לאחר הצגת הנתונים.


#### מקור מתח:

2 סוללות ליתיום CR2032 X 3V (כלולות במכשיר).


1. הסר/י את לשונית הפלסטיק ממכסה תא הסוללות להפעלת הסוללות.
2. כאשר הסימן LO מופיע על הצג, החלף/י את הסוללות בסוללות חדשות.

#### הוראות הפעלה:

1. בעזרת הלחצן הנמצא בסמוך לתא הסוללות, בחר/י ביחידת משקל הרצויה לך - ק"ג או ליברה.

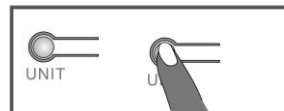

2. הנח/י את המשקל על משטח מוצק, ישר ואחיד וכדי למנוע החלקה וודא/י שמשטח המשקל אינו רטוב.
3. לבחירת משתמש לחץ/י על מפסק הזיכרון ובחר/י בין מספרי משתמש P0-P9.

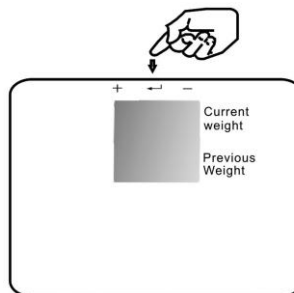

4. להפעלת המשקל, עמד/י על משטח השקילה. השתדל/י לעמוד במרכזו ללא תנועה.
5. המשקל יציג את מספר המשתמש P0-P9, לאחריו תוצאת המשקל תופיע ותהבהב על הצג שלוש פעמים.



6. בשורת התצוגה התחתונה תופיע תוצאת השקילה האחרונה ולאחריה תופיע תוצאת ההפרש בין השקילה האחרונה והנוכחית. (בשימוש הראשוני לא תוצג תוצאת השקילה האחרונה)



7. המשקל כבה אוטומטית לאחר הצגת הנתונים.

(לרוב, תוצאת השקילה הראשונית לאחר התקנה או החלפת הסוללות אינה מדויקת)

### מקרא תצוגה:

1. הסימן Err יופיע על הצג כאשר המשקל חורג ממשקל המקסימום 180 ק"ג.
2. כאשר הסימן LO מופיע על הצג, החלף/י את הסוללות בסוללות חדשות.

### הוראות בטיחות אחסנה ושימוש:

1. בזמן השקילה השתדלי/י לעמוד במרכז המשקל והימנע/י מתזוזה. זכוכית המשקל צריכה להיות יבשה על מנת למנוע החלקה.
2. על מנת להשיג דיוק מרבי, מומלץ להשתמש במשקל בשעה קבועה כל ערב (19:00-21:00).
3. שינוי מיקום המשקל עלול להשפיע על תוצאת השקילה.
4. על מנת לקבל תוצאות מדויקות, על המשקל להיות מונח על גבי משטח ישר ויציב בעת השימוש.
5. אין להניח את המשקל על משטח רטוב.
6. אין להרטיב את המשקל במים. לניקוי המשקל יש להשתמש במטלית לחה ו/או בחומר לניקוי חלונות.
7. כאשר המשקל לא בשימוש אין להניח עליו דברים, על מנת שלא לפגוע בדיוק המשקל.
8. אין להקיש בעוצמה על זכוכית המשקל.
9. המשקל כולל שתי סוללות ליתיום הממוקמות בתא הסוללות.

זכוכית המשקל עלולה להתנפץ במקרה של נפילה, חבטה חזקה, מכה בצידי הזכוכית או פגיעה בחפץ אחר. יש למקם את המשקל הרחק מקירות או רהיטים.



### אחריות ושרות:

אין לפתוח / לפרק את המשקל על מנת שלא לפגוע באחריות. האחריות הינה למשך שנה מיום הקניה ואינה מכסה שבר או נזק הנגרם משימוש לא נכון. האחריות הינה כנגד הצגת חשבונית קניה/מדבקת אחריות.

**מיוצר עבור ומשווק ע"י:** סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171. הרצליה 4672516.  
**מיוצר ע"י:** קסינפו האוסהולד אלקטרוניקס, סין.  
**מיובא ע"י:** מאג'י יבוא ושיווק צ.י. בע"מ, ת.ד. 407 נס ציונה 74104.  
 אישור דגם ישראלי מספר: WM0712-13ks

מוצרי Life, סודות מוצרי הבית של סופר-פארם, נבחרים בקפידה ומיצרים ממיטב המרכיבים, על מנת להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית. לשירותך, מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151

