




**הוראות שימוש, בטיחות ואחסנה.
משקל אדם מכני.
דגם: BR9012**

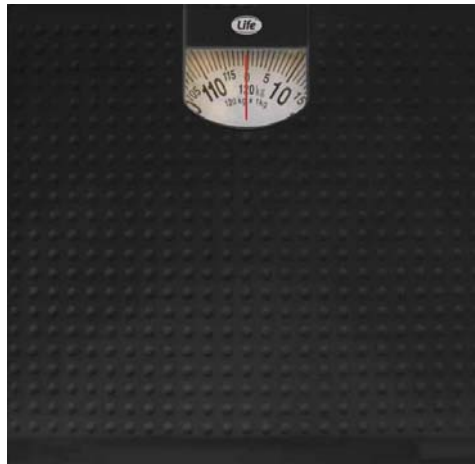

**אנא קרא/י הוראות אלו לפני הפעלה.
נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד.**

יכולת שקילה: עד 120 ק"ג. ערך שנת: 1000 גרם.
סטייה של עד 1200 גרם בטווח משקלים 0-65 ק"ג, סטייה של עד 2000 גרם בטווח משקלים 65-120 ק"ג.

1. הנח/י את המשקל על משטח מוצק ישר ויציב.
2. לפני השקילה הראשונה, עלה/י ורד/י מהמשקל מספר פעמים בכדי שהמנגנון המכני הפנימי של המשקל יתאזן לדיוק מרבי.
3. לפני השימוש במשקל, כוון/י את מחוג התצוגה לאפס בכפתור הכיוון שבתחתית קידמת המשקל.
4. עלה/י על המשקל בעדינות ועמוד/י במרכזו כשכפות הרגליים מקבילות על מנת ליצור פיזור אחיד של המשקל בין שני הצדדים. בזמן השקילה הימנע/י מתזוזה כך שמחוג התצוגה לא יזוז.

- על מנת להשיג דיוק מרבי, מומלץ להשתמש במשקל בשעה קבועה.
- אין להניח את המשקל על משטח רטוב.
- יש להקפיד על משטח ייבש למניעת ההחלקה.
- אין להרטיב את המשקל במים. לניקוי המשקל יש להשתמש במטלית לחה.
- כאשר המשקל לא בשימוש, אין להניח עליו דברים, על מנת שלא לפגוע בדיוק המשקל.
- לא לשימוש מסחרי.

אחריות ושרות:

אין לפתוח / לפרק את המשקל על מנת שלא לפגוע באחריות. האחריות הינה למשך שנה מיום הקניה ואינה מכסה שבר או נזק הנגרם משימוש לא נכון. האחריות הינה כנגד הצגת חשבונית קניה.

מיוצר עבור ומשווק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171. הרצליה 4672516.
מיוצר ע"י: קמרי אלקטרוניקס, קנטון 15, קואלון, הונג קונג.
מיובא ע"י: מאג'י יבוא ושיווק צ.י. בע"מ, ת.ד. 407 נס ציונה 74104. ח.פ. 514304674
אישור דגם ישראלי מספר: WM0779-14bs

מוצרי **Life**, סדרת מוצרי הבית של סופר-פארם,
נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת
להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית.
לשרותך, מחלקת שרות לקוחות: 09-9725151

השלכה: אין להשליך את המכשיר עם הפסולת הביתית הלא ממוינת. יש לאסוף פסולת כזו בנפרד לצורך טיפול מיוחד.

