

4 + 2 in 1 Sonic Device

חוברת הדרכה

מכשיר לטיפוח עור הפנים והגוף



ברכות על רכישת מכשיר לטיפוח עור הפנים והגוף מבית life
יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות טרם השימוש.

4 ראשים מתחלפים

החלפת ראשים מתבצעת על ידי הוצאת הראש הקיים והכנסת הראש המבוקש לבסיס המכשיר.

ראש עיסוי -

מסייע בספיגת תכשירי טיפוח.



ראש ניקוי רך -

לניקוי ראשוני לעור חלק משאריות לכלוך ושומן.



3 ראשי ספוג -

לשימוש בשגרת האיפור היומית.




ראש ניקוי יסודי -


לאחר הניקוי הרך, לניקוי כתמים ולכלוכים עקשים אשר הצטברו על שכבת העור.




הטענה

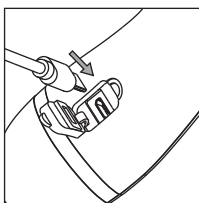


3. בעת ההטענה, אור חיווי אדום יידלק ובסיום ההטענה, כאשר הסוללה מלאה, אור חיווי ירוק יידלק.

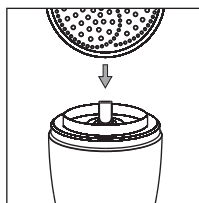

1. יש להסיר את מגן הגומי בגב המכשיר.

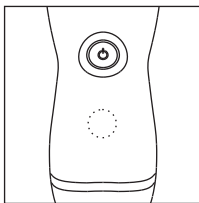

4. בשימוש הראשון יש לטעון את המברשת כ-3 שעות עד שנורת החיווי על גבי המכשיר מתחלפת מאדום לירוק.

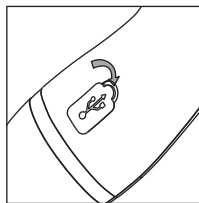

2. יש להכניס את כבל ההטענה לצורך טעינה.

סוג הטענה

מתח עבודה: 3.7v עוצמה: 1.3w הטענה: USB
תכולת סוללה: 500Mah זמן הטענה: 2.5-3 שעות

אזהרות ובטיחות

1. אין להשתמש במכשיר זה אם כבל ההטענה או המכשיר מראים סימנים של נזק כלשהו.
2. אין לפתוח את המכשיר.
3. יש לחבר את המכשיר רק בשקע ההטענה אליו הוא מיועד.
4. אם אתם סובלים בעיות בריאותיות, התייעצו עם רופא לפני השימוש במכשיר.
5. אסור להשתמש על תינוקות, בני אדם ישנים או חסרי הכרה.
6. אסור להשתמש על עור חסר תחושה או עם מחזור דם לא תקין.
7. אסור להשתמש ישירות על אזורי עור דלקתיים, נפוחים או עם פצעונים.
8. המכשיר אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי.
9. מוצר זה כולל חלקים קטנים המהווים סכנת חנק עבור ילדים קטנים.
10. מותר להשתמש במכשיר באזורים רטובים, אך אין לטבול אותו במים.
11. אסור להשתמש במכשיר בזמן הטענה.
12. אסור להשתמש לאחר פילינג כימי.
13. לא מיועד לשימוש על ידי ילדים או בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות נמוכות אלא אם כן בפיקוח האדם האחראי לבטחונם.
14. יש להרחיק מבעלי חיים.

הערכה כוללת

1. ראש ניקוי רך - לניקוי ראשוני לעור חלק משאריות לכלוך ושומן.
2. ראש ניקוי יסודי - לאחר הניקוי הרך, לניקוי כתמים ולכלוכים עקשים אשר הצטברו על שכבת העור.
3. ראש עיסוי - מסייע בספיגת תכשירי טיפוח.
4. ראש ספוג - ראש ספוג - לשימוש בשגרת האיפור היומית.
5. ראש ספוג - ראש ספוג - לשימוש בשגרת האיפור היומית.
6. ראש ספוג - ראש ספוג - לשימוש בשגרת האיפור היומית.
7. בסיס טעינה מעוצב
8. כבל נטען USB.

הוראות שימוש


שלב ראשון

יש להסיר כל שאריות איפור ולשטוף את הפנים עם מים חמים וסבון.




שלב שני

להניח כמות קטנה של תכשיר ניקוי על הפנים.

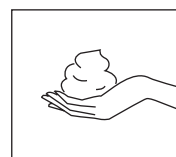

שלב שלישי

יש להפעיל את המכשיר עם ראש המכשיר הרצוי ולעסות את כל אזורי הפנים בתנועות מעגליות. מומלץ שלא להשתמש במכשיר מעל לדקה וחצי על כל הפנים.

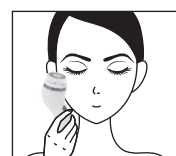

שלב רביעי

יש לשטוף את הפנים ואת המכשיר מכל עודף של סבון.



ניקוי המכשיר

1. יש להוציא את ראש המברשת מהמכשיר ולשטוף תחת מים זורמים במשך כ 10-5 שניות.
2. יש לייבש את ראש המברשת באמצעות מטלית רכה ויבשה.

מהירות המכשיר

למכשיר הניקוי ישנן 2 מהירות.

1. לחיצה קצרה אחת על כפתור ההפעלה למהירות בינונית.
2. לחיצה קצרה נוספת על כפתור ההפעלה למהירות גבוהה.
3. לחיצה קצרה שלישית תביא לכיבוי המכשיר.

Patent No.201630491136.7

Patent No.201621098644.X