

מטרת המוצר:

מכשיר פוטון המיועד לטפוח עור הפנים. למכשיר 7 מצבי אור לטפוח במצבים שונים דוגמת מיצוק העור, קמטוטים עדינים, נקבוביות וכדומה.

הוראות שימוש:


- יש להשתמש במסכה לאחר טעינה מלאה. במצב טעינה האור יהפוך אדום וכאשר המסכה בטעינה מלאה ירוק.
- ניתן להשתמש בסרום או במסכה חד פעמית לניקוי הפנים טרם השימוש ולאחר ניקוי הפנים ניתן להשתמש במקור האור המתאים כדי לסייע בספיגה. מומלץ להשתמש עם מוצרי טיפוח איכותיים שיעזרו לספיגה טובה יותר.
- לקראת שימוש יש ללבוש את סרט הראש ולמתוח את הרצועות האלסטיות בהתאמה לראש.
- כפתור המגע בחלקה העליון של המסכה מאפשר הפעלה במצבי נוחות שונים. מגן הסיליקון נועד להגן על העיניים מהאור.
- יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור המגע בחלקה העליון של המסכה למשך 1.5 שניות על מנת לפתוח/לסגור. לאחר הפתיחה, המסכה תיכנס למצב המתנה בו ניתן לבחור צבעים שונים.
- יש לבחור את האור בהתאם לסוג הטיפול המבוקש או לאפשר למצב האוטומטי לעבוד בין כל השבע אפשרויות לקבלת פתרון מותאם לטיפול מצב עור הפנים שלך.
- בפעם הראשונה שמשתמשים במסכה יש להפעילה באופן הדרגתי. בתחילה למשך כ 5 דק' כדי ללמוד אם יש רגישות כלשהי. לאחר כחצי שעה למשך כ 10 דקות נוספות ורק לאחר יומיים אם לא נוצרה כל רגישות ניתן להפעילה ברציפות למשך זמן עד 15 דקות. ניתן להבחין בתוצאות לאחר מספר שבועות של שימוש במסכה.
- בעת השימוש מומלץ לשכב בנוחות ולעצום עיניים. לא מומלץ לקרוא או לצפות בטלוויזיה.
- יש להימנע מהסתכלות ישירה על מקור האור של המסכה או התבוננות באור למשך זמן רב. מומלץ לכסות את העיניים עם דטייה או מסכת עיניים בעת השימוש.
- לאחר השימוש יש לנקות את המסכה היטב מחומרים עודפים.




THE LED MASK

אזהרות:

- השימוש במסכה אסור לילדים. יש להרחיק המסכה מהישג ידם של ילדים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מופחתת או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להימנע מהסתכלות ישירה על מקור האור של המסכה או מהסתכלות ממושכת מיד. מומלץ לעצום את העיניים בעת השימוש. אם למרות עצמת העיניים מרגישים שהאור חזק מדי, ניתן להשתמש ברטיות או במסכת עיניים.
- אין לבהות ישירות לתוך הדיודות או בהשתקפותן במראה מאחר וזה עלול לגרום לגירוי זמני של העיניים.
- בעת השימוש אין לכסות את המסכה או כל חלק אחר של המכשיר בבד או בחפץ כלשהו.
- אין ללחוץ לקפל או למעוך את לוח המעגלים ונורות האור שבמסכה.
- במידה ומשתמשים לפני השינה, מומלץ טרם הירדמות לאחסן חזרה בקופסה.
- בעת הניקיון אין להשרות במים. יש לנגב עם מטלית לחה ולנקות את הרצועה האלסטית משאריות חומרי קוסמטיקה.
- המכשיר חשמלי. על מנת למנוע התחשמלות, הקפידו על ההנחיות הבאות:
 - אסור להכניס את המכשיר למים
 - אסור להפעיל תחת מים זורמים
 - אסור לגעת ישירות במכשיר בידיים רטובות
 - אסור להשתמש במסכה על עור רטוב
 - אסור למתוח את כבל המכשיר. אם הכבל פגום, יש מיד להחליפו.
 - אסור להשתמש במכשיר אם נפל או נרטב
 - אסור להפעיל את המכשיר במקום שבו עלול להיחשף למוצרים דליקים או במקום עם רטיבות/לחות גבוהה.

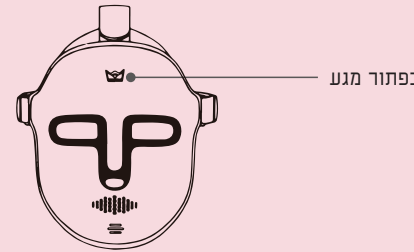


1. יש להדליק את המסכה באמצעות כפתור המגע

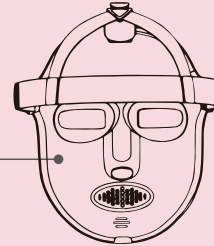

שבב אור צבעוני

2. יש לכוון את גודל רצועת התמיכה עד לנוחות מירבית

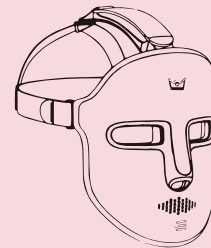

3. יש להניח את המסכה על הראש ולהשלים את פעולת הטיפול לפי הצרכים.

9.8. אסור להשתמש בעת שינה, סחרחורת, אי ערנות מלאה, מצב שכרות או גילופין.

9.9. אסור להשתמש במוצר על פצעים פתוחים, מאחר והחום עלול להגביר את זרימת הדם ולגרור לדימום.

9.10. אסור להשתמש במסכה עם משחות או תכשירים המייצרים חום שכן עלולה להיווצר כוויה בעור.

9.11. אסור לנסות לתקן או לשנות דבר במכשיר.

יש איסור מוחלט להשתמש במוצר בכל אחד מהמצבים הבאים ללא היועצות מוקדמת עם רופא:

1. אין להשתמש בתקופת הריון, חום גבוה, בעיה זיהומית, מחלת עור, אופתלמופתיה, דלקת בכלי דם או ברקמות, נטייה לדימומים, שחפת, מחלות לב, קוצב לב או שתלים אלקטרוניים, גידולים ממאירים, פציעה בעור הפנים, הפרעות תחושתיות בעור, אלרגיות בעור או בעת שימוש בתרופות עם רגישות מוגברת לאור השמש.
2. אם טרם עברו 72 שעות מעת פציעה בעור.

הבהרה: מוצר זה אינו מיועד לאבחן, לרפא או למנוע מחלות. אין למכשיר כל יכולת לרפא מצב פיזי, מצב עור או מצב נפשי. יש להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך בתחום הבריאות לגבי כל מצב הדורש טיפול רפואי.

סופר-פארם אינה נושאת בכל אחריות עקב שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות השימוש ולאזהרות או במקרה של היווצרות רגישות כלשהי, בעיה אסתטית, רפואית, שנגרמו על ידי שימוש במכשיר. אם זוהתה רגישות או תופעה בלתי רצויה כלשהי יש לחדול מיד משימוש במכשיר ולהיוועץ עם רופא.

סוגי אור LED:

אדום 620-630 ננומטר:

מקדם את ייצור הקולגן, ממריץ את פעילות התאים ומסייע להפחתת קמטים וקמטוטים.

ירוק 520-525 ננומטר:

מסייע לאיזון של בלוטת החלב, להפחתת נקודות שחורות ופצעים ולאיזון תרכובת שמן ומים בעור.

כחול 440-465 ננומטר:

מתאים לבעלי עור רגיש, שומני או בעל אקנה. מסייע לאיזון שמן מים בעור.

סְגוּל:

אור בעל תדר כפול של אור אדום וכחול. המשלב את ההשפעות של שני סוגי האור במיוחד בטיפול באקנה וצלקות אקנה.

כתום 590-610 ננומטר:

מסייע להבהיר את גוון העור, פירוק פיגמנטים ועשוי לזרז החלקת צלקות.

ציאן:

משפר בהדרגה את האנרגיה התאית ומסייע לקידום חילוף חומרים.

אור לבן:

חודר לשכבות עמוקות של העור, ומאיץ את תהליך המטבוליזם של הרקמות הפעילות.

השימוש בסוללת ליתיום - אין להכניס למכשיר סוללה שאינה תואמת את דגם סוללת הליתיום. חל אסור מוחלט מטעמי בטיחות לנסות לפרק את הסוללה. אין לאחסן את הסוללה ליד סוללות רגילות. סכנה - יש להרחיק את הסוללה מהישג ידם של ילדים, הסוללה קטנה וילד עלול לבלוע את הסוללה ואף להיחנק.

בסיום חיי המכשיר ניתן לבדוק עם הרשות המקומית היכן יש נקודת איסוף פסולת של מוצרי חשמל וציוד אלקטרוני באזור המגורים או למוסרו למחזור בכל אחת מחנויות רשת סופר-פארם. טרם השלכת המוצר יש להוציא את הסוללה ולהעבירה לנקודת איסוף של פסולת סוללות. מטעמי הגנת הסביבה ובטיחות בתום חיי המוצר נא לא להשליך את המכשיר או את הסוללה לפח האשפה.

רכיבי המוצר: פוליקרבונט ופלסטיק ABS, נורת לד

המסכה דגם: BM-43,

סוללת ליתיום דגם: 602040 , 400 mAh , הספק DC 5V , 3.7W

מידות: אורך 23 סמ', רוחב 20 סמ, גובה 9 סמ', משקל 325 גר'

#sokovibes

מיוצר עבור ומיובא ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ שנקר 16, הרצליה, 4672516. מחלקת שירות לקוחות: 09-9725151
מיוצר ע"י: Guangzhou Beimei Beauty Equipment Co.,LTD **ארץ יצור:** סין