

BRAUN

Skin[®]
i·expert



Scan Me!



2570992BR00

טבלת התאמה לשימוש במכשיר על פי גוון העור וגוון השיער

	 I	 II	 III	 IV	 V	 VI
	✓	✓	✓	✓	✓	×
	✓	✓	✓	✓	✓	×
	✓	✓	✓	✓	✓	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×
	×	×	×	×	×	×

הטיפול אינו מומלץ

×

הטיפול מומלץ

✓

עברית

מוצרינו תוכננו לעמוד ברמות סטנדרט מהגבוהות ביותר באיכות, עיצוב וביצועי המכשיר.

באמצעות טכנולוגיית אור מקצועית, מכשיר בראון סקין איי אקספרט הבזקי אור בעצימות גבוהה (IPL), מאפשר להסיר לצמיתות שיער לא רצוי וגלוי בנוחות בבית.

יש לקרוא בעיון את כל הוראות ההפעלה בשלמותן לפני השימוש במכשיר, כולל כל התוויות נגד, אזהרות ומידע בטיחותי. יש לשמור את החוברת לעיון נוסף בעתיד.

מכשיר זה תוכנן להפחית צמיחת שיער לטווח ארוך לאחר תקופה מסוימת של טיפול.

אזורי גוף אידיאליים לשימוש כוללים:

נשים: רגליים, ידיים, בית השחי, אזור הביקיני והפנים (מתחת לעצמות הלחיים)

זהירות: אין להשתמש במכשיר ליד העיניים ולאורך המצח.

באזורים אינטימיים, אין להשתמש באזורים רגישים, כמו אזור הנרתיק או פי הטבעת.

גברים: כתפיים ומטה (חזה, גב, ידיים, בטן, רגליים)

זהירות: אין להשתמש על הפנים, הצוואר או אזור איברי המין.


שימוש על זקנים זכריים או שיער פנים עלול להוביל לתוצאות לא אחידות ולאורך זמן ועלולות לייצר שינויים במאפייני הפנים שאולי אינם רצויים.

IPL לא מתאים לכולם. הוא יעיל ביותר על גווני עור בהירים עד בינוניים וצבעי שיער כהים.

יש לעיין בטבלת גווני העור וצבעי השיער בעמוד 3 כדי לבחון את מידת ההתאמה לשימוש במכשיר.


תיאור

1. חלונת טיפול
2. חיישני גוון העור SensoAdapt™
3. נוריות חיווי עוצמה
4. בורר רגישויות עם נוריות חיווי
5. לחצן טיפול
6. ידית
7. ספק כח/מטען
8. כבל חשמל
9. מסנן UV מזכוכית
10. ראש סטנדרטי
11. ראש רחב*
12. ראש צר*

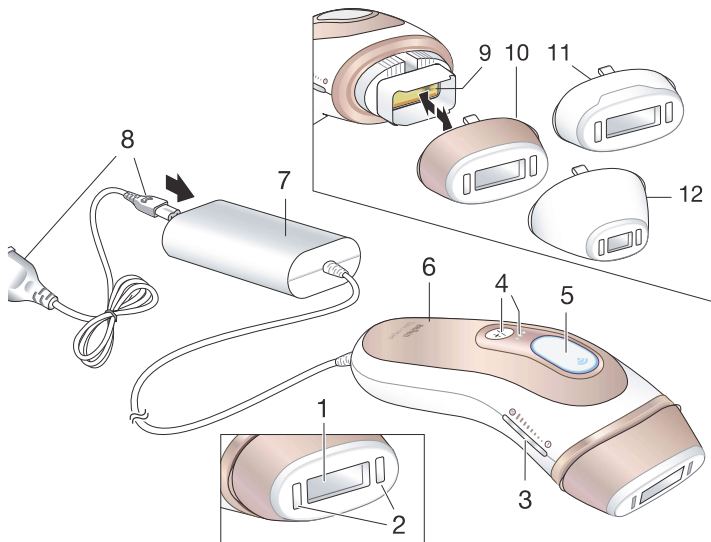

כיצד המכשיר פועל?

מסיר השיער בראון סקין איי אקספרט פועל מתחת לפני העור על ידי פליטת הבזקי אור ממוקדים הפוגעים בפיגמנט השיער (המלנין) בזקיק השערה ומסייעים למנוע מהשיער לצמוח. בשימוש תקופתי ולאורך זמן, אנרגיית האור מסייעת למניעת צמיחת שיער שאינו רצוי להגיע אל פני העור.

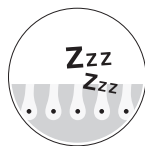

חיישני גוון עור 2 (SensoAdapt™), קוראים כל הזמן את גוון העור לפני כל הבזק, ומתאימים אוטומטית את עוצמת הבזקי האור כדי לקבל את התוצאות היעילות ביותר והבטיחותיות ביותר. זה מאפשר טיפול מתאים בהתאם לגוון העור, אך מונע טיפול אם גוון העור כהה מדי.

במצבים אלו, יש להימנע מהשימוש במכשיר:

- אם העור שלך כהה יותר מגוון העור המוצג בטבלת גווני העור בעמוד 3 (V). מכיוון שעור כהה סופג יותר אנרגיית אור, טיפול בעור כהה מאוד עלול לגרום לאי נוחות/כאב ולהשפעות שליליות (למשל, כוויות, שלפוחיות, שינוי צבע או צלקות) ולפצוע את העור.
- אם את בהריון, מניקה או מתחת לגיל 18, מכיוון שמכשיר זה לא נבדק על קבוצות אלו.
- אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או נגעים טרום סרטניים (למשל, שומה מלנוציטית (כתם עורי מולד) או מספר רב של שומות).
- אם העור עבר שיזוף טבעי או מלאכותי לאחרונה. העור עשוי להיות רגיש בעקבות חשיפה לשמש ורגיש במיוחד לתופעות לוואי של טיפול IPL (כגון צריבה, שלפוחיות, שינוי צבע או לגרום לצלקת בעור). כמו כן, יש להימנע מחשיפה לא מוגנת לאור שמש ישיר לאחר הטיפול.

תנאים מסוימים יכולים גם לאסור את השימוש במכשיר זה. אין להשתמש במכשיר במקרים הבאים:

- ידוע לך על בעיה רפואית כרונית.
- ידוע לך על מחלת עור כרונית (למשל פסוריאזיס או ויטיליגו) או עור פגום (למשל כוויות שמש, חתכים, פצעים פתוחים או זיהומים פעילים) באזורי הטיפול.
- במידה ויש דליות באזור הטיפול המיועד.
- ידוע לך על רגישות לאור השמש או שהינך מטופל/ת בתרופות שעלולות להפוך את העור לרגיש יותר (למשל רטין A, אקוטן ו/או רטינואידים אחרים).
- לאחר טיפול פילינג עור מקצועי באזור שבו ברצונך לטפל.
- במידה ומתקיימים אחד התנאים מעלה, מכשיר זה עלול לפגוע בעור או להחמיר מצב קיים. הינך עלול/ה לחוות תופעות לוואי כגון כוויות, שלפוחיות ושינויים בצבע העור (היפר או היפו-פיגמנטציה) או צלקות.

בכל מקרה של ספק האם מכשיר זה בטוח לשימוש, יש להיוועץ ברופא המטפל או ברופא עור.

במידה והינך נוטל/ת כל סוג של תרופה באופן קבוע ולאורך תקופה ארוכה, יש להיוועץ עם הרופא המטפל לגבי כל השפעה אפשרית על רגישות העור לאור.

אזהרות

אין לטפל באזורים אלו:

- קרקפת, גבות או כל מקום ליד או סביב העיניים. שימוש באזורים אלה עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך לעיניים.
- קעקועים או איפור קבוע באזור הטיפול.
- פטמות, איברי מין או סביב פי הטבעת. אזורים אלה עשויים להיות בעלי צבע עור כהה יותר ו/או צפיפות שיער גדולה יותר ושימוש במכשיר באזורים אלו עלול לגרום אי נוחות/כאב או פציעה בעור.
- כתמים חומים כהים או שחורים כגון נמשים, כתמי לידה, שומות או יבלות באזור הטיפול.
- זקן / שיער פנים עבור גברים.

לא מומלץ להשתמש במכשיר באזורים בעור בהם ישנה נוכחות של חומרי מילוי. אין לטפל באותו אזור של העור יותר מפעם בשבוע. נזק עלול להיגרם לאחר טיפול ממושך או חוזר באותו אזור.

בטיחות לעיניים



אין להישיר מבט לתוך מסנן UV מזכוכית (9) או לנסות להפעיל את המכשיר לכיוון העיניים. כדי להגן על בטיחות העיניים של המשתמש והסובבים בקרבת מקום, המכשיר יכול לפעול רק כאשר שני חיישני גוון העור נמצאים במגע הדוק עם העור. אם מסיבה כלשהי המכשיר מצליח לפעול גם ללא מגע כזה, יש להפסיק מיידית את השימוש ולהביאו למרכז שרות מוסמך. יש לפעול על פי ההוראות כדי למנוע פגיעה אפשרית לעיניים (עלול לגרום לאובדן ראייה) או פגיעה בעור. הגן על העיניים מפני חשיפה. אין להשתמש במכשיר מעל העפעפיים או קרוב לעין. אנו ממליצים להסיט את העיניים מהמכשיר בעת לחיצה על לחצן הטיפול.

אזהרות ייחודיות

- המכשיר אינו מיועד לשימוש לאנשים מתחת לגיל 18.
- אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר רק אם הם תחת פיקוח או אם ניתנו להם הנחיות לגבי שימוש בטוח במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בשימוש.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.
- שמור/י תמיד את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים
- סיכונים נוספים אפשריים – חשיפה להבזקי האור עלולה לגרום לכוויות או נזק לעיניים, התחשמלות וסכנת חניקה כתוצאה מכריכה של כבל המכשיר.

בטיחות חשמל ואש

יש לבדוק בקביעות את המכשיר ואת הכבלים לאיתור סימנים גלויים של פגמים. במקרה של נזק או סדקים, יש להפסיק את השימוש במכשיר. קיימת סכנת התחשמלות כתוצאה משימוש במכשיר פגום. במקרה של פגמים, יש לפנות למרכזי השירות כפי שמופיע בתעודת האחריות. עבודת תיקון לא מוסמכת עלולה להוביל לסכנות קיצוניות עבור המשתמש.

זהירות

- יש לנתק את המכשיר מהחשמל תמיד לאחר השימוש או במקרה של הפסקת חשמל כדי למנוע סיכון או נזק למכשיר.
- אין לחשוף את המכשיר לזעזועים חזקים כדי למנוע סיכון של נזק לבטון.
- אין לחבר את המכשיר לנקודת חשמל עם גישה מוגבלת לניתוק מהחשמל.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא מופעל כדי למנוע סכנות של שריפה או כוויות.

אזהרה

- יש לחבר את המכשיר לחשמל כראוי ורק לנקודת חשמל תקינה, חיבור לשקע תקול או שלא כראוי עלול לגרום לשריפה או כוויות.
- אין לבצע כל שינוי במכשיר או באביזרים / רכיבים. זה עלול לגרום לתקלה והפסקת העבודה של המכשיר.

סכנה

אין לנסות לתקן או לפתוח את המכשיר, מכיוון שהדבר עלול לחשוף את המשתמש לרכיבים חשמליים מסוכנים ולהבזקי אור, שכל אחד מהם עלול לגרום נזק גופני חמור ו/או פגיעה קבועה בעין.

אזהרה: מים וחשמל הם חיבור מסוכן!

אין להשתמש במכשיר בקרבת מים ובמשטחים רטובים למשל אמבטיות, מקלחת, בריכה, כיורים או משטחים נוספים העלולים להיות רטובים, יש למנוע כניסת מים למכשיר.



למניעת התחשמלות, לעולם אין להשתמש במכשיר רטוב.

אין להשתמש אם המכשיר פגום (כגון מבנה סדוק, נזק לכבל וכו'). חלקים פנימיים במכשיר מכילים מטענים חשמליים מסוכנים. יש לבדוק בקביעות את חלונות הטיפול (1) לאיתור פגמים: אין להשתמש אם מסנן UV מזכוכית (9) סדוק או חסר. אין להשתמש אם הרפלקטור המובנה חסר או לא ממוקם נכון. אין לגעת במסנן הזכוכית במהלך או ישירות לאחר השימוש מכיוון שהוא יתחמם. אין להשתמש בחומרי ניקוי מבוססי נפט או דליקים (אלכוהול, אצטון) על המכשיר שכן אלו מהווים סכנת שריפה. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים. אלה עלולים לגרום נזק למכשיר או לשרוט את מסנן זכוכית. אין לנסות להשתמש במכשיר זה מלבד להסרת שיער לא רצוי.

אין להפעיל את מכשיר על משטח שאינו עור. אין ללחוץ על לחצן ההפעלה כאשר חלופית הטיפול (1) אינה ממוקמת במגע מלא עם משטח העור. אין לחסום את פתחי האוורור. המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה ולהוות סכנת התחשמלות או סכנת שריפה.

בשימוש מתמשך טמפרטורת המכשיר יכולה לעלות עד ל 60 מעלות. לאחר הטיפול יש להסיר את המכשיר מהעור.

אופן השימוש במכשיר הכנת אזור הטיפול

יש להסיר כל שיער נראה לעין לפני השימוש במכשיר. ניתן להסיר בכל שיטה שתבחר/י, במידה ובחרת להשתמש להסרת השיער בשעווה או באפילציה יש להמתין 24 שעות בטרם ביצוע הטיפול במכשיר IPL. כדי לשמור על חלופית הטיפול נקיה ושלמה, יש לוודא שלא נותר שיער על שטח העור. יש להקפיד שהעור באזור הטיפול יהיה נקי ויבש.

הפעלת המכשיר

יש לחבר את מתאם מתח החשמל לשקע חשמל באמצעות כבל החשמל (8). יש ללחוץ על כל לחצן (4 או 5) להפעלת המכשיר. נוריות חיווי עוצמה (3) נדלקות לרגע והמאוורר מתחיל לפעול. זה אומר שהמכשיר מוכן לפעולה. במהלך הפעולה, המכשיר יתחמם מעט.

התאמת עוצמת אור אוטומטית

כאשר שני חיישני גוון העור (2) נמצאים במגע עם העור, המכשיר קורא את גוון העור ומתאים אליו אוטומטית את עוצמת האור אשר מסומנת על ידי נוריות חיווי עוצמה (3). סימון זה מאשר שהמכשיר מוכן לפעולה.

	עור בהיר < עוצמה גבוהה
	עור כהה < עוצמה נמוכה בקצב מהיר
 נוריות כבויות	אין מגע עם העור < אין הבזק אור
 נורה אדומה	בעיה אחרת עם העור < אין הבזק אור

מצבי רגישות

יש ללחוץ על לחצן בורר הרגישות (4) כדי להפחית את עוצמת האור. ניתן לבחור בין 3 מצבי פעולה:

סטנדרטי: 3 נוריות חיווי

רגיש: 2 נוריות חיווי

רגיש במיוחד: נורית חיווי אחת (עוצמת האור הנמוכה ביותר עם קצב הבזק מהיר) מצבי הפעולה העדינים מיועדים לאזורים רגישים ולמשתמשים במכשיר בפעמים הראשונות. בעוצמת אור נמוכה, ייתכן ויהיה צורך בטיפולים נוספים כדי לקבל את התוצאות הרצויות.

נוריות חיווי עוצמה יבהבו כדי לאשר שינוי בהגדרת עוצמת האור.

לכיבוי המכשיר יש ללחוץ על לחצן הפעלה עדינה עם נורית חיווי (4) יותר מ-3 שניות. לאחר 10 דקות ללא שימוש, המכשיר יכבה אוטומטית. להפעלה מחדש, יש ללחוץ על כל לחצן.

טיפול בוחן



לפני ביצוע טיפול ראשון, אנו ממליצים לבדוק את תגובת העור למכשיר זה. מומלץ לבצע את הבדיקה בשטח קטן באחד מהאזורים הבאים: רגל תחתונה, רגל עליונה, בית שחי, זרוע תחתונה.

הבדיקה תתבצע על ידי שני הבזקים צמודים כמתואר בהמשך תחת הכותרת: "שיטות טיפול" – "פעולה נקודתית" יש להמתין 15 דקות כדי לבחון את אזור הבחינה. אם העור נראה תקין, ניתן להתחיל את הטיפול הראשון שלך. אם מתפתחת תגובה עורית, יש לעבור למצב רגיש ולחזור על הבדיקה. יש להמתין שוב 15 דקות. אם תגובת העור נמשכת, יש להמתין 24 שעות נוספות. אם קיימת תגובה עורית לאחר 24 שעות, יש להפסיק את השימוש במכשיר ולהיוועץ ברופא.

שיטות טיפול

יש להקפיד שהעור באזור הטיפול יהיה ללא שיער, נקי ויבש. לפני לחיצה על לחצן הפעלה, יש להסיט את המבט הצידה כדי להימנע מהבזק האור. במקרים נדירים, האור עלול להיות מסנוור מאוד. למרות זאת, אין במקרה זה סיכון בטיחותי. ליתר נוחות, מומלץ לבצע את הטיפול בחדר מואר היטב להפחתת הסינוור.

למסיר שיער זה יש שני מצבי פעולה:

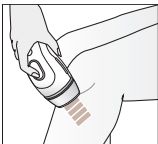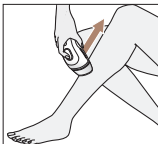פעולה נקודתית – STAMPING לטיפול באזורים קשים לגישה ואזורים רגישים בגוף (למשל פנים) (בנשים), קו ביקיני, בתי שחי, ברך, סנטר וקרסול) 	פעולה בהחלקה – GLIDING לטיפול מהיר ועיל בשטח גדול (למשל רגליים) 
1. יש להצמיד את חלונית הטיפול לעור באופן ששני חיישני גוון העור ימצאו במגע הדוק עם העור. נוריות חיווי העוצמה (3) ידלקו בלבן.	
2. יש ללחוץ ולשחרר (לחיצה קצרה) על לחצן הטיפול (5). מסיר השיער יתחיל להבזיק אור.	2. יש ללחוץ ולהחזיק לחיצה על לחצן הטיפול (5) מבלי להרפות. מסיר השיער יתחיל להבזיק אור.
3. יש להרים את המכשיר ולהניח על אזור הטיפול הבא שהינו סמוך לזה שסופל. יש להמתין שנוריות חיווי העוצמה ידלקו בלבן. לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן הטיפול.	3. יש להחליק את המכשיר על פני האזור באיטיות וברציפות מלמטה לכיוון מעלה של אזור הטיפול. יש להקפיד לא לנתק מגע מהעור כך שהמכשיר יתבהב ברציפות.

לאחר השלמת הפעולה בהחלקה, יש להרים את המכשיר מחוץ לאזור הטיפול, ולחזור על שלבים 1-3 ולטפל באזור הסמוך הבא בהליך	יש להמשיך טיפול נקודתי עד להשלמת כל אזור הטיפול הרצוי.
--	---


בכדי להבטיח כיסוי נאות של כל אזורי הטיפול ולהימנע מאזורים שלא יטופלו, מומלץ להניח את המכשיר על פני העור בקווים ישרים ועוקבים, בסמוך לאזור שטופל, מבלי להשאיר מרווח בין האזורים המטופלים. יש להימנע מטיפול חופף או טיפול באותו אזור פעמיים מכיוון שהדבר עלול להגביר את הסיכוי לתופעות לוואי.

אם הינך חווה כאב עז, יש להפסיק את הטיפול מיד ולהיוועץ עם רופא לפני השימוש במכשיר שוב.

התאמת ראש המכשיר

- ראש המכשיר הסטנדרטי (10) מתאים לטיפול בכל האזורים.
 - ראש המכשיר (11) * מתאים לטיפול באזורים גדולים.
 - ראש המכשיר (12) * מתאים לטיפול באזורים קטנים, מפותלים, שקשים לטיפול.
- *אינו מסופק בכל הדגמים.

במכשירים המסופקים עם שני ראשים, אחד יהיה מסומן ⊕ סימון זה יסייע להבחין בין ראש המכשיר המיועד לפנים לבין ראש המכשיר המיועד ליתר חלקי הגוף.

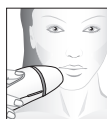

טיפול בפנים (לנשים בלבד)

- לפני הטיפול בפנים, יש לבצע טיפול בוחן. יש להסיר מאזור הטיפול כל שיער, מוצרי קוסמטיקה, קרמים ותכשירים.
- לפני לחיצה על לחצן הטיפול, יש לעצום עיניים או להסיט את המבט כדי להימנע מהבזק האור. יש להימנע מטיפול חופף או טיפול באותו אזור פעמיים מכיוון שהדבר עלול להגביר את הסיכוי לתופעות לוואי.
- בעת טיפול באזור השפה העליונה, יש להימנע ממגע עם השפתיים והנחיריים.
- האזור המרכזי מתחת לנחיריים עשוי להיות רגיש.
- אין להשתמש על שפתיים לאחר טיפול תוחם קבוע או חצי קבוע בשולי השפתיים.
- המלצה: ניתן ללחוץ את השפתיים יחד כדי להבטיח שהבזק האור לא יופעל על השפה העליונה עצמה.
- צמיחת שיער מתחת לסנטר יכולה להיות צפופה וגסה יותר. זה יכול לפעמים להוביל לאדמומיות קלה בעור לאחר הטיפול. אדמומיות זו הינה זמנית לאמורה להיעלם לחלוטין לאחר 24 שעות.

כיצד לטפל באזורים אינטימיים (נשים בלבד)



- לפני טיפול באזורים אינטימיים יש לבצע טיפול בוחן (עמ' 8).
- יש להסיר שיער וקרמים מהאזור המיועד לטיפול. ניתן לוודא שאין שאריות שיער באמצעות מראה.
- ניתן לעמוד, לשבת או להתכופף לצורך גישה לכלל האזורים האינטימיים. לטיפול באזור האינטימי, יש להשתמש בראש המדויק / צר (12) בשיטת טיפול נקודתי (עמ' 10).
- אין לחלוק את ראש הטיפול (12) המיועד לטיפול באזורים אינטימיים עם משתמשים נוספים.

כדי למנוע אי נוחות, יש לבחור את המצב הרגיש במיוחד: יש ללחוץ על לחצן מצב (4) עד לקבלת נורית חיווי אחת בלבד.

שיטת טיפול נקודתי מומלצת לאזורים אינטימיים (עמ' 10):

1. יש להצמיד את חלון הטיפול לעור, וודאי שלשני חיישני העור יש מגע עם העור. ניתן למתוח את העור עם האצבעות לשיפור מגע עם העור.
2. נוריות החיווי (3) מציגות אור לבן.
3. יש ללחוץ ולשחרר מיד את לחצן הטיפול (5). המכשיר ישדר הבזק.
4. יש להרים את המכשיר ולהצמיד שוב על הנקודה הסמוכה הבאה לטיפול. יש לחזור על שלבים 2 עד 4 ולהמשיך נקודה אחר נקודה עד לסיום האזור כולו.

יש לשים לב:

מכיוון שאזורים אינטימיים נוטים להיות בעלי צבע עור כהה יותר, ייתכן שהמכשיר לא יבהב מסיבות בטיחות גם אם למכשיר יש מגע טוב עם העור.

- אם מתרחשת אדמומיות או תחושת צריבה למשך מספר דקות, יש להניח מטלית קרירה להרגעת העור.
- אם נצפו שינויים בפיגמנט בעור, למשל התבהרות או התכהות, יש להפסיק את השימוש במכשיר. יש לפנות לקבלת יעוץ רפואי לבירור הגורם שייתכן וקשור למצב רפואי אחר.

תוכנית טיפול

טיפול התחלתי	טיפול אחד לשבוע במשך 4-12 שבועות
טיפול משמר	טיפול לפי הצורך למשל אחת לחודש-חודשיים

מחזור צמיחת השיער משתנה מאדם לאדם ויכול לארוך עד 16 חודשים תלוי באזור הגוף (בית השחי, הרגל התחתונה, אזור הביקני). מכיוון שרק השערות בשלב הצמיחה רגישות לטיפול באור, חשוב לבצע מספר טיפולים כדי להשיג עור חלק לגמרי. מהסיבה הזאת, מומלץ על טיפול התחלתי פעם בשבוע לאורך 4-12 שבועות.

במידה והשיער אינו ממשיך לצמוח אין צורך להשלים טיפול של עד 12 שבועות וניתן לעבור לתוכנית טיפול משמר.

לאחר הטיפול

לאחר סיום הטיפול, יש לנתק את המכשיר מהחשמל.

לאחר הטיפול, מומלץ להגן על העור באמצעות שימוש בקרם הגנה עם מקדם מעל 15 SPF בכל חשיפה לשמש. מומלץ להימנע מחשיפה למקורות אור מלאכותיים כגון תאי שיוף. אין למרוח קרמים בעלי בישום או מוצרים העלולים לגרות את העור למשך 24 שעות לאחר הטיפול. זה כולל שימוש בסאונה או ג'קוזי, לבישת בגדים צמודים, שימוש בקרם הבהרה או מוצרי פילינג. הפעולות האלו עלולות לגרום לגירוי בעור, כגון גירוד ואדמומיות, באזורי הטיפול.

ניקוי ואחסנת המכשיר

לאחר כל טיפול יש לבדוק את חיישני גוון העור (2) ואת ראש הטיפול (1). במידה ויש סימנים או כתמים שחורים יש לנקות מיד עם מטלית יבשה ללא סיבים. אין לגעת או לנקות את ראש הזכוכית (9) מיד לאחר סיום הטיפול, יש להמתין עד להתקררות המכשיר. אין לשטוף או לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.

כדי להבטיח ביצועים מקסימליים, יש לשמור על הראשים (10, 11, 12) נקיים מלכלוך, שיער או פסולת אחרת. אין להרטיבם אלא להשתמש במטלית יבשה.

יש לאחסן את המכשיר במקום קריר, יבש ובטוח. יש לוודא שחלונית הטיפול וחיישני גוון העור מוגנים מפני נזק.

תופעות לוואי אפשריות

חלק מהמשתמשים במכשיר יחוו אי נוחות קלה (למשל חום או אדמומיות העור) בעת השימוש במכשיר – זה תקין. תתכן הרגשת חום ועקצוץ בעת הפעלת ההבזק, ולאחר מכן אדמומיות בעור. תגובה זו לרוב תחלוף תוך 24 שעות. תופעות לוואי הן בדרך כלל מיידיות או עלולות להופיע תוך 24 שעות. במקרים נדירים, ייתכן ויופיעו לאחר 72 שעות. במידה ומופיעות תופעות לוואי חריגות בעור, יש לפנות לרופא המטפל.

תופעת לוואי	כיצד להעריך את התופעה ולהגיב
תחושה חמימה או עקצוץ במהלך הטיפול אשר לרוב תיעלם לאחר מספר שניות עד דקה ופוחתת עם המשך השימוש במכשיר.	תופעה צפויה ותקינה עבור כל טיפולי IPL. ניתן להמשיך את השימוש במכשיר בהתאם להוראות.
תחושת אי נוחות או כאב עז במהלך הטיפול או שמתגבר לאחר הטיפול.	יש להפסיק את הטיפול מיד ולהיוועץ עם רופא לפני השימוש במכשיר שוב.
אדמומיות בעור במהלך או לאחר הטיפול אשר נעלמת תוך דקות ספורות ועד מספר שעות.	תופעה צפויה ותקינה עבור כל טיפולי IPL. ניתן להמשיך את השימוש במכשיר בהתאם להוראות ולאחר שתחלוף האדמומיות.
אדמומיות בעור שאינה נעלמת בין 24–48 שעות לאחר הטיפול.	יש להפסיק את הטיפול מיד ולהיוועץ עם רופא לפני השימוש במכשיר שוב.
במקרים נדירים מאד:	
נפיחות ואדמומיות סביב זקיק השערה אשר נעלמת תוך יומיים או שלושה ימים.	ניתן להמשיך את השימוש במכשיר בהתאם להוראות ולאחר שתחלוף הנפיחות והאדמומיות סביב זקיק השערה.
נפיחות ואדמומיות סביב זקיק השערה שאינה נעלמת לאחר יומיים או שלושה ימים.	יש להפסיק את הטיפול מיד ולהיוועץ עם רופא לפני השימוש במכשיר שוב.
שינויים זמניים בגוון העור (התבהרות או התכהות).	אם גוון העור משתנה, יש להפסיק את הטיפול מיד ולהיוועץ עם רופא.
צמיחת שיער מוגברת באזור הטיפול (שכיח יותר למשתמשים ממוצא ים תיכוני).	במקרה שהצמיחה המוגברת נמשכת לאורך מספר טיפולים, יש להפסיק את הטיפול מיד ולהיוועץ עם רופא.

במקרים של תופעות לוואי חריגות אנא פנה לגורם הרשמי המוסמך וליצרן המכשיר.

פתרון תקלות

המדריך הבא לפתרון תקלות עשוי לסייע לפתור בעיות ראשוניות שהמשתמש עלול לחוות בעת השימוש במכשיר.

פתרון	תקלה
יש לוודא שהמכשיר מחובר לחשמל. יש ללחוץ על לחצן כלשהו (4 או 5) כדי להפעילו. יש לוודא ששני חיישני גוון העור ימצאו במגע הדוק עם העור. במידת הצורך, יש להזיז את המכשיר על מנת לוודא ששני חיישני גוון העור מקבלים מגע עם העור.	נוריות חיווי העוצמה לא נדלקות גם כאשר חלונית הטיפול במגע עם העור.
מומלץ להשתמש בראש מדויק (12) * באזורים קטנים, מפותלים, שקשים לטיפול. (* במידה וקיים). יש לוודא ששני חיישני גוון העור ימצאו במגע הדוק עם העור.	המכשיר אינו פועל על אזורים קטנים.
המכשיר נמצא במצב בהגנה מפני התחממות יתר. יש לאפשר למכשיר להתקרר על מנת לחזור למהירות תקינה.	רצף הבהוב המכשיר מאט את הקצב.
קריאת גוון עור לא תקינה. העור או בהיר מדי או כהה מדי. המכשיר לא יבהב.	בנוריות חיווי עוצמה רק הנורית הראשונה נדלקת באור אדום.
המכשיר כבוי. יש ללחוץ על כל לחצן להפעלת המכשיר.	נורית לחצן בורר הרגישות (4) מהבהבת.
ראש המכשיר מנותק, יש לחברו מחדש.	הנורית הראשונה בפסי החשמל מהבהבת באדום.
תקלה במכשיר. המכשיר לא יפעל. יש לנתק ולחבר מחדש. אם התקלה נמשכת יש ליצור קשר עם מרכז השירות של בראון.	נוריות חיווי העוצמה מציגות דפוס לא מוכר של הדלקה של נורה אחת באור אדום יחד עם נוריות באור לבן.

תקלה	פתרון
כל נוריות החיווי דולקות באור לבן.	סוף חיי המוצר. המכשיר הגיע למספר מקסימלי של הבזקים (400,000).
המכשיר שבור, סדוק או פגום.	אין להשתמש אם הידית, ספק/ מטען או כבל החשמל פגומים. אין להשתמש במכשיר במידה ויש ספק לגבי בטיחות המוצר או חשד שהינו פגום.

הגנה על הסביבה

מוצר זה כולל סוללות/ או רכיבים אלקטרוניים הניתנים למחזור. לשמירה על הסביבה, בגמר חיי המוצר, אין להשליכו לאשפה הביתית, אלא להביאו למחזור בנקודות איסוף הפסולת האלקטרונית הזמינות למקום מגורכם.



העלון בכפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.